

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

جهاز التدليك الكهربائي
POWER PULSE ذو ٨ رؤوس

SKU: PDLFST191BK

٢	نبذة عن المنتج
٢	المواصفات
٣	إرشادات السلامة
٣	تعليمات استخدام محظورة
٤	تحذيرات وتنبيهات هامة
٥	الرسم التخطيطي والوصف
٦	نظرة عامة على لوحة التحكم
٧	تعليمات الشحن
٧	تعليمات الاستخدام
٩	التنظيف والصيانة
٩	إزالة البطارية
١٠	إصلاح المشاكل
١٠	محتويات العبوة
١٠	التخلص
١١	الضمان
١١	تواصل معنا

تم تصميم جهاز التدليك Porodo LifeStyle POWER PULSE ذو ٨ رؤوس لتوفير تجربة تدليك عميقة للعضلات، مما يساعد على تخفيف آلامها وتعزيز استرخائها. يتميز الجهاز بـ ٨ رؤوس تدليك مختلفة، كل منها مصمم خصيصًا لتغطية مناطق معينة من الجسم، مما يساعد على تخفيف توتر العضلات وتعزيز الاسترخاء. مع ٩ مستويات سرعة قابلة للتعديل، يمكنك تخصيص تجربة التدليك لتناسب احتياجاتك. كما أنه مزود بتقنية الضوء الأحمر، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتخفيف آلام العضلات، وتعزيز عملية الشفاء. تم تصميمه للمساعدة في استرخاء العضلات وتعزيز عملية الشفاء. من أهم مزايا هذا الجهاز:

- a.** مستويات سرعة: يمكنك ضبط مستوى قوة التدليك حسب رغبتك.
- b.** تقنية الضوء الأحمر: تعزز عملية الشفاء بتحسين الدورة الدموية وتقليل إرهاق العضلات.
- c.** استخدام متواصل لمدة ساعتين: أداء متواصل دون انقطاع.
- d.** محرك قوي بسرعة ٣٢٠٠ دورة في الدقيقة: يوفر تدليكًا عميقًا وفعالًا.
- e.** جلسات تدليك مبرمجة: إعدادات زمنية مدمجة تتيح لك التحكم في مدة جلسة التدليك لتحقيق أقصى درجات الاسترخاء.

المواصفات

جهد الإدخال	٨ فولت/أمبير
القدرة الكهربائية المقدرة	٢٥ واط
سرعة المحرك	٣٢٠٠ دورة في الدقيقة
مدة التشغيل	ساعتان
مدة الشحن	٤,٥ ساعة

سعة البطارية	١٥٠٠ مللي أمبير/ ساعة
مفتاح توصيل الشحن	USB-C
الوزن الصافي	١,٢٢ كجم
أبعاد المنتج	١١٠×١٩٥,٥×٨٠,٥ مم
رقم الموديل	LFS1٩١

إرشادات السلامة

١. في حال وجود أي من الحالات التالية، يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدام المنتج:
٢. النساء الحوامل أو اللواتي أنجبن مؤخراً.
٣. مرضى القلب أو من لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب.
٤. الإصابات العظمية، أو هشاشة العظام، أو أي تشوهات في العمود الفقري أو المفاصل.
٥. تاريخ مرضي للإصابة بالأورام الخبيثة.

تعليمات استخدام محظورة


١. هذا المنتج غير مخصص لاستخدام الأطفال. كما ينبغي عدم استخدامه في حال وجود إصابة أو جرح في الجلد.
٢. لا تستخدم المنتج على الأسطح الرطبة أو غير النظيفة. يُنصح بتطبيق المنتج عبر الملابس، مع الضغط بلطف وتحريكه على الجلد لمدة ٦٠ ثانية تقريباً لكل منطقة.
٣. تجنب استخدام المنتج على الرقبة أو في المناطق التي تغطيها طبقة رقيقة من الأنسجة العضلية، مثل العظام. استخدمه فقط على الأنسجة الرخوة في الجسم دون الشعور بأي إزعاج أو ألم.

٤. توقف عن استخدام المنتج في حال ظهور كدمات أو ألم أو إزعاج.
٥. لا تضع أي أطراف أو أجسام داخل فتحات المنتج.
٦. تجنب غمر المنتج في الماء أو أي سائل آخر لتجنب الصدمة الكهربائية أو حدوث ماس كهربائي.
٧. لا تعرض المنتج للحرارة أو تضعه بالقرب من اللهب.
٨. لا تسقط المنتج عن قصد أو تتعامل معه بشكل غير لائق.
٩. لا تحاول فك أو تفكيك المنتج بأي طريقة.
١٠. حافظ على بُعد أصابعك أو أي جزء من جسمك عن الجزء الخلفي لرأس التدليك لتجنب الإصابة.
١١. تجنب الوقوف أو الجلوس مباشرة على المنتج، فقد يتسبب ذلك في السقوط.
١٢. لا تستخدم المنتج أثناء ارتفاع درجة حرارته لتجنب تلف المحرك.


تحذيرات وتنبيهات هامة

١. بعد الانتهاء من الشحن، افصل شاحن الجهاز دائماً.
٢. للحصول على أفضل أداء، استخدم شاحنًا بقوة ٥ فولت وبمعدل تيار ٢ أمبير أو أعلى.
٣. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية.
٤. أغلق الجهاز قبل إزالة البطارية.
٥. تخلص من البطارية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.



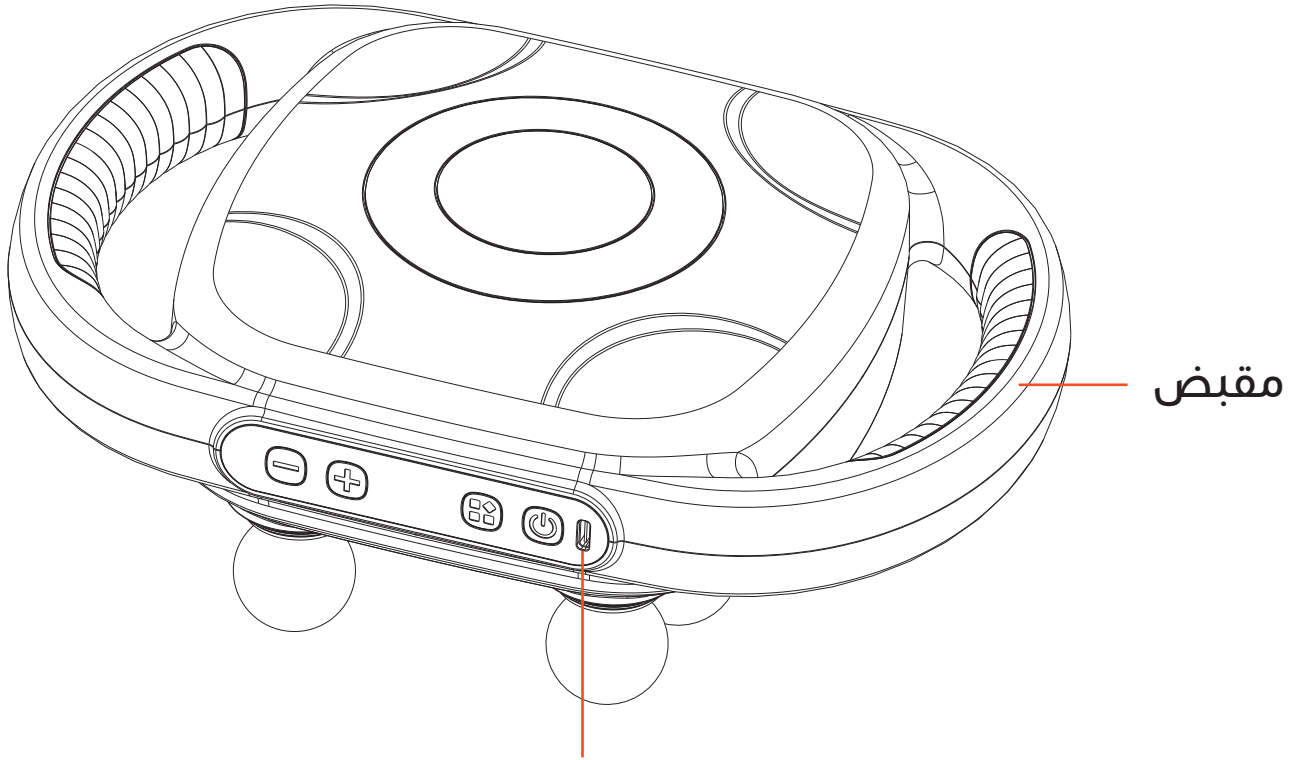


مقبس شحن من النوع C

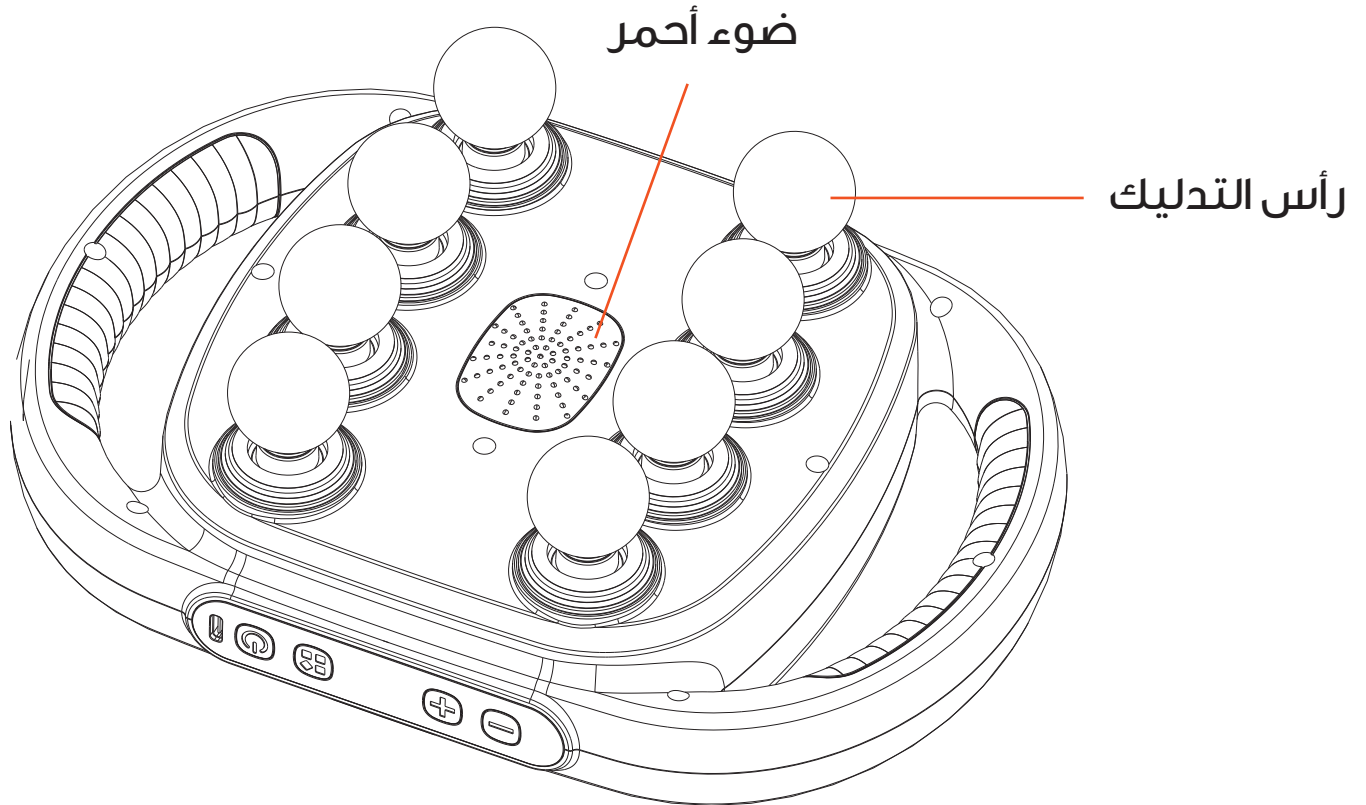


١. **المقبض:** مصمم بشكل مريح لسهولة حمله واستخدامه.
٢. منفذ شحن من نوع USB-C: يضمن شحنًا سريعًا وفعالًا.
٣. مؤشر ضوئي أحمر: يُظهر حالة تشغيل الجهاز.
٤. رأس التدليك: مزود بنقاط تدليك متعددة مصممة لتوفير تجربة تدليك مريحة وفعالة.

نظرة عامة على لوحة التحكم

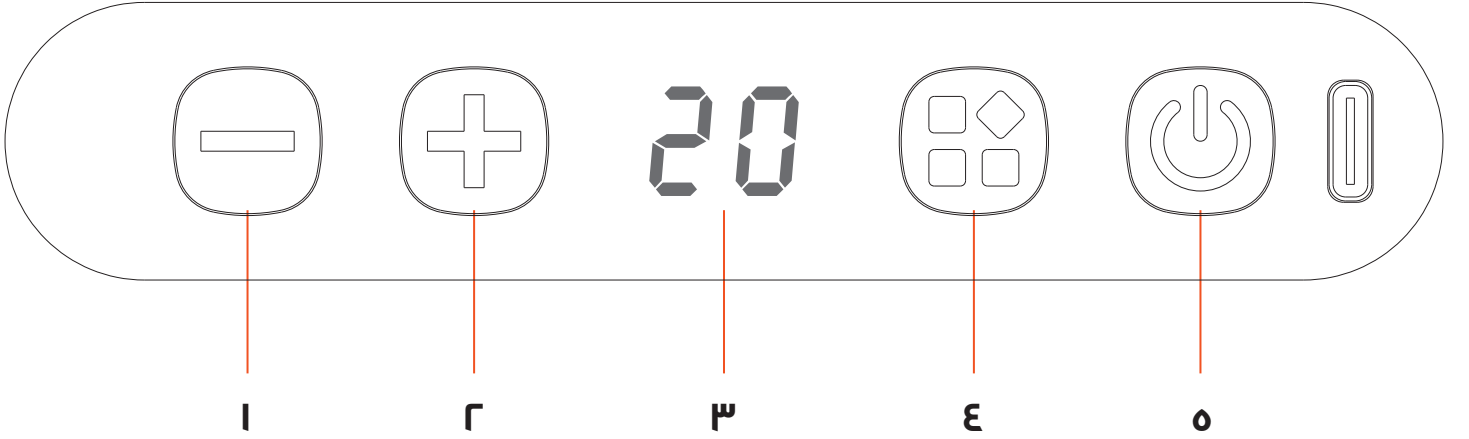

١. خفض السرعة: استخدم هذا الزر لخفض سرعة الجهاز إلى المستوى الذي تفضله.
٢. زيادة السرعة: اضغط على هذا الزر لزيادة سرعة الجهاز حسب رغبتك.
٣. الشاشة الرقمية: تعرض السرعة الحالية أو وضع التشغيل. الرقم الموجود على الشاشة يشير إلى السرعة أو المدة الزمنية المحددة.
٤. وضع التشغيل: استخدم هذا الزر للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة لتعديل وظائف الجهاز.
٥. زر التشغيل/إعدادات الوقت: استخدم هذا الزر لتشغيل الجهاز أو إيقافه، كما يمكنك استخدامه أيضًا لتحديد أو تعديل الوقت.

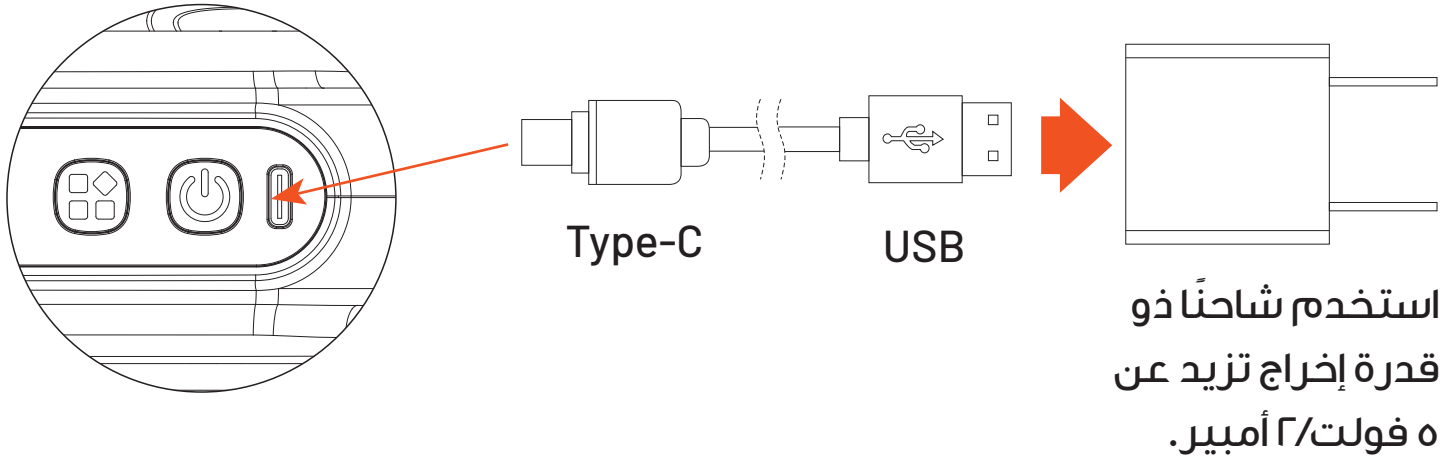

١. قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تأكد من شحن البطارية بالكامل. سيساعد ذلك في تحسين أداء البطارية وطول عمرها.
٢. أثناء عملية الشحن، ستظهر رسالة نصية متحركة على الشاشة. وعند اكتمال الشحن، ستظل الشاشة مضاءة.
٣. إذا بدأت الشاشة بالوميض، فهذا يعني أن مستوى شحن البطارية منخفض. يُرجى شحن الجهاز فورًا لتجنب توقف التشغيل.
٤. يمكن شحن البطارية في أي وقت، بغض النظر عن مستوى شحنها الحالي.
٥. لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. يجب فصله عن مصدر الطاقة قبل استخدامه.
٦. في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يُنصح بشحن البطارية بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على أدائها.

تعليمات الاستخدام

١. زر التشغيل/إعدادات الوقت:
 - a. لتشغيل الجهاز أو إيقافه، اضغط باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٥ ثوانية. سيتم بذلك تفعيل أو تعطيل كل من وظائف التدليك والإضاءة الحمراء.
 - b. أثناء تشغيل الجهاز، يمكنك ضبط مدة جلسة التدليك.

اضغط ضغطاً خفيفة على زر التشغيل/الإيقاف. مع كل ضغط، يتم تحديد فترات زمنية مختلفة: ١٠ دقائق، ٢٠ دقيقة، ٣٠ دقيقة.

٢. زر الوضع:

اضغط ضغطاً خفيفة على زر الوضع للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة. أوضاع التشغيل المتاحة هي:

الوضع P١

الوضع P٢

الوضع P٣

الوضع P٤

الوضع P٥

الوضع P٦

الوضع P٧

الوضع P٨

الوضع P٩

اختر الوضع الذي يناسب تفضيلاتك.

٣. زر زيادة السرعة:

لزيادة سرعة التدليك، اضغط على زر الزيادة. تزيد كل ضغط مستوى السرعة بمقدار واحد، حتى يصل إلى المستوى ٢٠، حيث ستعرض الشاشة الرقمية الرقم ٢٠.

٤. زر خفض السرعة:

لخفض سرعة التدليك، اضغط على زر الخفض. تقلل كل ضغط مستوى السرعة بمقدار واحد، حتى يصل إلى المستوى ١، حيث ستعرض الشاشة الرقمية الرقم ١.

ملاحظات:

a. عند انتهاء الوقت المحدد، ينتقل الجهاز تلقائيًا إلى وضع إيقاف التشغيل الذكي، ثم يعيد تشغيل نفسه.

b. عند استخدام وضع P١، يقوم الجهاز بضبط نفسه تلقائيًا لزيادة قوة التدليك، مما يوفر تجربة استخدام أفضل.

١. تأكد دائماً من إيقاف تشغيل جهاز التدليك قبل تنظيفه.
٢. استخدم قطعة قماش رطبة قليلاً لمسح سطح الجهاز بلطف، ثم جففه جيداً بقطعة قماش ناعمة وجافة.
٣. تجنب استخدام مواد تنظيف قوية مثل الفرش أو البنزين أو الكيروسين أو منظفات الزجاج أو المحنقات، لأنها قد تلحق الضرر بالجهاز.
٤. بعد التنظيف، احتفظ بجهاز التدليك في عبوته الأصلية أو ضعه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. احرص على حمايته من الغبار والأتربة.
٥. تم تصميم جهاز التدليك وتصنيعه خصيصاً بحيث لا يحتاج إلى صيانة إضافية أو استخدام زيوت تزييت. لا حاجة لإضافة أي زيوت أو مواد صيانة أخرى بشكل دوري.

إزالة البطارية

a. عند انتهاء عمر البطارية، قم بإزالتها وإعادة تدويرها بالطريقة الصحيحة. لا تقم بإلقائها في سلة المهملات. b. لا تقم بفك جهاز التدليك قبل انتهاء عمر البطارية.	تحذير 
--	--

١. يجب إزالة البطارية فقط بعد نفاد طاقتها بالكامل، وعندما يصبح الجهاز غير قابل للتشغيل.
٢. بعد إزالة البطارية، من الضروري تجنب أي اتصال بين طرفيها الموجب والسالب لتجنب خطر حدوث ماس كهربائي.

المشكلة	الحل
عدم التشغيل	قد تكون بطارية جهاز التدليك منخفضة. تأكد من شحنها بالكامل قبل الاستخدام.
توقف مفاجئ عن العمل	انتهت مدة الاستخدام، وسيتم إيقاف الجهاز تلقائيًا.
إصدار صوت خفيف أثناء التشغيل	هذا الصوت ناتج عن آلية عمل الجهاز، وليس عطلًا فنيًا.

محتويات العبوة

جهاز التدليك x ١
كابل شحن من نوع USB-C x ١
دليل حل المشكلات

التخلص

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**