

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

Lavender

إزالة الشعر بتقنية IPL الباردة جداً

SKU: PDLFSTY11WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	رسم تخطيطي
٤	محتويات العبوة
٥	تشغيل الجهاز
٦	إرشادات السلامة
٨	إرشادات التشغيل والاحتياطات
١١	قيود الاستخدام
١١	اختبار حساسية الجلد
١١	إعدادات شدة الضوء
١٢	التحضير قبل الاستخدام
١٣	تعليمات الاستخدام
١٤	دليل جدول العلاج
١٤	العناية بعد العلاج
١٥	التنظيف والصيانة
١٥	الأسئلة الشائعة
١٧	التخلص
١٨	الضمان
١٨	اتصل بنا

يوفر جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL الباردة برائحة اللافندر من Porodo إزالة فعالة للشعر مع مستويات شدة قابلة للتعديل من ١ إلى ٩ وأنماط وميض متعددة لإزالة الشعر (HR)، والعناية بالبشرة (SC)، وتجديدها (RA). يتميز بوظيفة تبريد لراحة إضافية أثناء العلاج، ويتضمن أوضاع وميض وتبريد تلقائية لسهولة الاستخدام. يوفر هذا الجهاز الصغير نتائج بجودة احترافية لبشرة ناعمة وخالية من العيوب في المنزل.


المواصفات

الجهد المقنن	٢٤٠-١٠٠ فولت
التردد المقنن	٦٠ / ٥٠ هرتز
سلك الطاقة	قابس ثلاثي الأطراف بريطاني
الطاقة المقننة	٤٠ واط
طاقة الإضاءة	١٠-١٥ جول/سم ²
نطاق الطول الموجي	١٢٠٠-٤٧٠ نانومتر
مستويات الطاقة	٩ أوضاع قابلة للتعديل
أوضاع التشغيل	إزالة الشعر، العناية بالبشرة، تجديد البشرة/مكافحة الشيخوخة
درجة حرارة التخزين	٤٠-، درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل	٣٥-٥ درجة مئوية
وزن المنتج	٣٥٨ غرام
رقم الموديل	PDLFSTYII


١. يُرجى استخدام المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في الدليل لضمان الاستخدام السليم والسلامة.
٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل القاصرين دون سن ١٦ عامًا. يُرجى إبقاؤه بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة.
٣. تماشياً مع التزامنا بالتنمية المستدامة، نحفظ بالحق في تحديث منتجاتنا أو تعديلها، بما في ذلك تغييرات في وظائفها أو واجهتها أو مظهرها.
٤. نظراً لتحديثات المنتج، في حال وجود أي اختلاف بين الوصف والمنتج الفعلي، تُعتمد تفاصيل المنتج الفعلي.
٥. لسلامتك، ارتد دائماً نظارات واقية عند استخدام هذا الجهاز، وحافظ على نافذة الفلاش بعيدة عن عينيك أثناء الاستخدام.

رسم تخطيطي




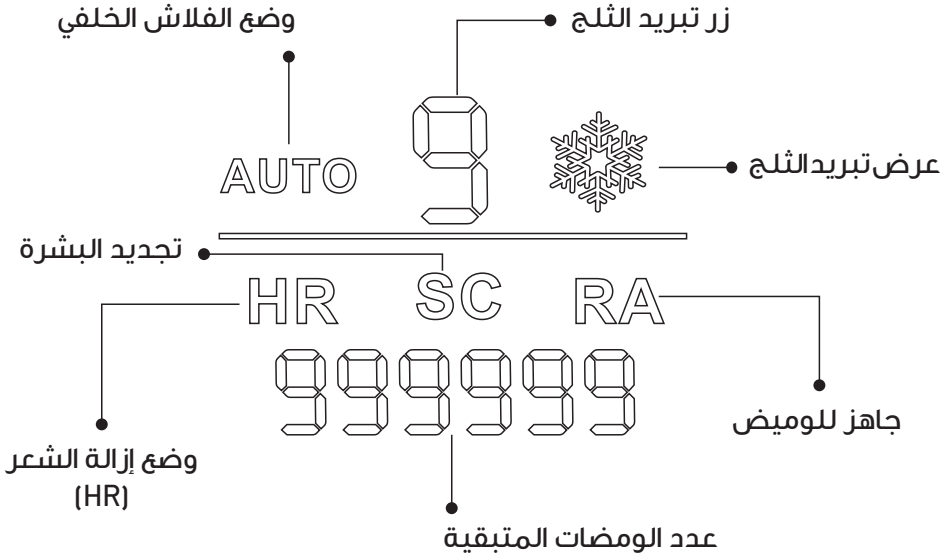


محتويات العبوة

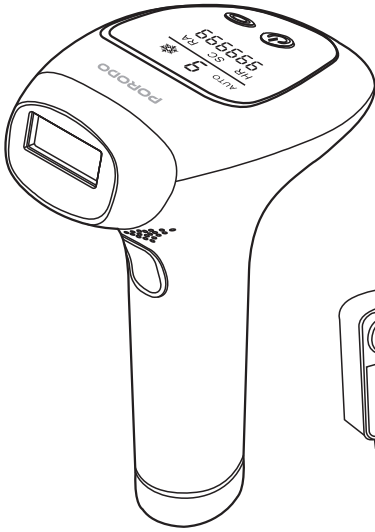

المنتج (جهاز إزالة الشعر) x 1

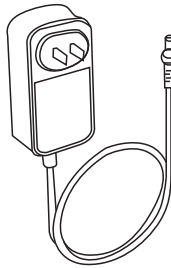

ماكينة حلاقة كهربائية x 1

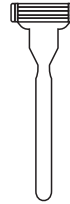

محول طاقة x 1



نظارات واقية x 1

a. التشغيل:

١. بعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، سيضيء مؤشر التشغيل.
 ٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل ضغطة قصيرة أو طويلة.
 ٣. بمجرد تشغيل الجهاز، اضغط على زر مستويات الشدة لضبط الشدة من المستوى ١ إلى المستوى ٩.
 ٤. ستعرض الشاشة مستوى الشدة المحدد. المستويان ٢-١: وضع تجديد البشرة (SC). المستويات ٩-٣: وضع إزالة الشعر (HR).
- ### b. الإيقاف:

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. إذا تُرك الجهاز دون استخدام لمدة ١٥ دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة.

c. وظائف وضع الوميض

١. وضع الوميض اليدوي:

يتم تفعيل وضع الوميض اليدوي تلقائياً عند تشغيل الجهاز. ضع الجهاز عمودياً على بشرتك واضغط على زر الوميض ضغطة قصيرة لبدء جلسة علاج IPL.

(ملاحظة:) لن يصدر أي وميض إذا لم يكن الجهاز ملائماً للجلد بشكل كامل.

٢. وضع الوميض التلقائي:

بعد الضغط على زر الوميض لمدة ٣ ثوانٍ، ستظهر أيقونة "AUTO" على الشاشة، مما يشير إلى أن الجهاز في وضع الوميض التلقائي. سيومض الجهاز تلقائياً بمجرد ملامسته للجلد. للعودة إلى الوضع اليدوي، اضغط على زر الوميض لمدة ٣ ثوانٍ.

d. وضع التبريد بالثلج:

لتفعيل وضع التبريد بالثلج، اضغط لفترة وجيزة على زر التبريد بالثلج، وسيظهر رمز التبريد بالثلج على الشاشة.

يمكن استخدام وضع التبريد بالثلج بشكل مستقل لتهدئة البشرة. مع ذلك، لا تضغط على زر الوميض عند استخدام وظيفة التبريد وحدها لتجنب تلف الجلد.

يمكن استخدام وضع الوميض اليدوي أو وضع الوميض التلقائي مع وضع التبريد بالثلج.

(ملاحظة:) لن يصدر أي وميض إذا لم يكن الجهاز ملائماً للجلد بشكل كامل، لكن

وظيفة التبريد ستظل نشطة.)

e. وضع التبريد بالثلج + وضع الوميض اليدوي:

يجب وضع الجهاز عموديًا على الجلد. سيصدر وميض مع كل ضغطة عندما يلامس منفذ الضوء الجلد تمامًا، وسيتم تفعيل تأثير التبريد في الوقت نفسه لتخفيف أي انزعاج جلدي.

f. وضع التبريد بالثلج + وضع الوميض التلقائي:

ستظهر أيقونة "AUTO" على الشاشة بعد الضغط على زر الوميض لمدة ٣ ثوانٍ، مما يشير إلى أن الجهاز في وضع الوميض التلقائي. سيصدر الوميض تلقائيًا بمجرد ملامسة منفذ الضوء للجلد تمامًا، وسيعمل تأثير التبريد في الوقت نفسه لتهدئة الجلد. من الطبيعي ظهور قطرات ماء على منطقة التبريد في الصباح عند استخدام وضع التبريد بالثلج. بعد إطفاء الجهاز، استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح قطرات الماء لتجنب الوميض الخاطئ.

إرشادات السلامة

١. قيود الاستخدام: قد يُسبب استخدام هذا المنتج إزعاجًا أو آثارًا جانبية لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية، أو الأمراض الجلدية، أو التهاب الجلد التحسسي، أو البشرة الحساسة. في حال ظهور أي آثار جانبية أثناء الاستخدام، يُرجى التوقف عن استخدام المنتج فورًا.

٢. لا تستخدم هذا المنتج على المناطق المتضررة من الجلد، مثل الحروق، أو البثور، أو الجروح، أو المناطق المصابة بأمراض جلدية نشطة أو عدوى.

٣. إذا كنت تتناول أدوية حساسة للضوء لأغراض علاجية، فمن المهم استشارة الطبيب قبل استخدام المنتج. قد يؤدي استخدام المنتج دون استشارة الطبيب إلى تلف الجلد.

٤. هذا المنتج غير مناسب للحوامل، أو المرضعات، أو الأفراد الذين يعانون من الدورة الشهرية، أو الذين لديهم ندوب في الجسم، أو مرضى السكري، أو ذوي البشرة الهشة، أو ذوي البشرة الحساسة للضوء.

٥. يجب على الأفراد المصابين بأمراض قلبية حادة، أو ارتفاع ضغط الدم المتوسط إلى الشديد، أو ام خبيثة، التهاب الجريبات، أمراض جلدية معدية، حروق جلدية، أو اضطرابات التخثر، الامتناع عن استخدام هذا المنتج.

٦. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من خلل في استقلاب الكولاجين، بما في ذلك تاريخ من الندوب أو ضعف التئام الجروح.

- ٧.** لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأفراد الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية، مثل الدوالي أو توسع الأوعية الدموية في منطقة العلاج.
- ٨.** تجنب الاستخدام إذا كانت بشرتك حساسة للضوء أو عرضة للطفح الجلدي أو الحساسية.
- ٩.** لا يُنصح باستخدام الجهاز على المناطق المصابة، أو من قبل الأفراد المصابين بفيروس الهربس البسيط، أو الآفات الجلدية، أو الأورام الدموية.
- ١٠.** لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأفراد الذين يعانون من أمراض ضعف المناعة، بما في ذلك عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والذئبة الحمامية، والبورفيريا، وما إلى ذلك.
- ١١.** يجب على الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النزيف، أو الذين يستخدمون أدوية مثل التريتينوين، أو حمض الفاكهة (ألفا هيدروكسي الأسبارتيك)، أو حمض الساليسيليك (بيتا هيدروكسي الأسبارتيك)، أو حمض الأزيليك، تجنب استخدام هذا المنتج.
- ١٢.** استخدم هذا المنتج بحذر إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لإزالة الشعر كيميائيًا أو استخدمت منتجات تفتيح البشرة أو مكونات فيتامين أ خلال الثلاثين يومًا الماضية.
- ١٣.** لا تستخدمه مع منتجات الزيوت العطرية في الوقت نفسه. تأكد من أن الجلد في منطقة العلاج نظيف وجاف، وخالٍ من أي كريمات أو مواد ترطيب أو مستحضرات تجميل.
- ١٤.** إذا لم يكن الجلد نظيفًا وجافًا، فقد يؤثر ذلك على أداء المنتج، وقد يتسبب في تلف الجهاز.
- ١٥.** لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص الذين تلقوا مؤخرًا حقنًا من مواد مالئة أو سموم.
- ١٦.** لا تستخدم الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس أو الحروق حتى يشفى تمامًا، لأنه قد يزيد الحالة سوءًا. كما أنه غير مناسب للأشخاص المصابين بالصرع أو الذين يعانون من نوبات صرع أو صداع نصفي ناتجة عن الضوء، لأن الضوء قد يزيد هذه الحالات سوءًا.
- ١٧.** تجنب استخدام الجهاز على المناطق التي بها وشم أو بقع داكنة (مثل النمش الداكن، أو علامات الولادة، أو الشامات، أو التآليل). تمتص هذه المناطق المزيد من الضوء، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق الجلد.
- ١٨.** لا تستخدم الجهاز حول الرأس أو الأذنين أو الحلمات أو الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بحروق جلدية.
- ١٩.** إذا كنت تعاني من أمراض جلدية مثل الصدفية أو الإكزيما أو الهربس أو الجروح أو الطفح الجلدي، فلا تستخدم الجهاز. هذه الحالات تجعل الجلد أكثر حساسية وقد تسبب تورمًا أو تقرحات أو عدوى. يرجى استشارة الطبيب للتأكد من علاج الحالة قبل الاستخدام.

٢٠. لا تستخدم هذا المنتج إذا كانت لديك ندوب، أو بشرة حساسة للضوء، أو إذا كنت تتناول أدوية تزيد من حساسية الجلد للضوء. ويشمل ذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الأسبرين، والإيبوبروفين، والباراسيتامول)، والتتراسيكلين، والفينوثيازول، ومدرات البول، والسلفوناميدات، والتريازين إيميدازوليوم، والفلوروديازين، والفينبلاستين، وحمض الجريزوفولفين، وحمض الكاروتين، وفيتامين أ حمض الإيزوتريتينوين، وحمض الريتينويك الموضعي، أو غيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

٢١. إذا كان لديك تاريخ مرضي لأمراض حساسية الجلد للضوء، مثل البورفيريا، أو الطفح الشمسي متعدد الأشكال، أو الشرى الشمسي، يُمنع استخدام الجهاز، لأنه قد يزيد من حساسية الجلد.

إرشادات التشغيل والاحتياطات

١. ارتد نظارات واقية دائمًا عند تشغيل الجهاز.
٢. قبل استخدام الجهاز، نظّف المناطق المراد علاجها من الجسم. لا تستخدم أي مستحضرات تجميل أو منتجات للعناية بالبشرة قبل الاستخدام، لأنها قد تُتلف الجهاز وتؤثر على أدائه.
٣. عند استخدام الجهاز لأول مرة، ابدأ بأقل مستوى شدة واختر الإعداد المناسب لتجنب إتلاف البشرة. في حال استخدام شدة عالية قد تُصاب البشرة بالاحمرار أو التورم. في هذه الحالة، ضع كمادات باردة على البشرة فوراً.
٤. بعد الاستخدام، احرص على ترطيب البشرة وحمايتها من الضوء القوي والأشعة فوق البنفسجية باستخدام واقي الشمس.
٥. يُنصح باستخدام منتجات ترطيب وترميم نباتية خالصة للعناية بعد العلاج.
٦. نظّف سطح الجهاز بقطعة قماش ناعمة جافة أو قطعة قماش مبللة خالية من الكحول.
٧. لا تُعرّض الجهاز أو ملحقاته للسوائل أو البيئات الرطبة.
٨. احتفظ بالجهاز في بيئة جيدة التهوية وجافة، وتأكد من إبقائه بعيداً عن متناول الأطفال.
٩. لا تُدخّل أي معادن في فتحة التبريد، فقد يُسبب ذلك خطر الصق الكهربائي.
١٠. في حال تلف غلاف المنتج أو امتلائه بالماء عن طريق الخطأ، يُرجى إرساله إلى الشركة المصنعة لإصلاحه والتأكد من إمكانية إعادة استخدامه بأمان. في حال دخول الماء أثناء

التشغيل، يُرجى فصل مصدر الطاقة فوراً لضمان السلامة.

11. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه دون إذن.

12. في حال تعطل الجهاز، يُرجى إعادته إلى الشركة المصنعة مع جميع الملحقات المرفقة لإجراء الصيانة اللازمة.

تحذيرات

1. تجنب توجيه الجهاز نحو العينين، فقد يتسبب الضوء القوي المنبعث منه في إلحاق الضرر بهما.

2. في ظروف التشغيل العادية، تجنب ملامسة فتحة تهوية الجهاز مباشرة، فقد تتسبب حرارتها في حروق جلدية.

3. في ظروف التشغيل العادية، لا تُدخل أي أجسام داخل الجهاز، فقد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالجسم.

4. تجنب استخدام مزيل العرق مباشرةً بعد معالجة منطقة الإبط.

5. لتجنب الحروق أو الأعطال، افحص ونظف منفذ الإشعاع بانتظام لإزالة أي أوساخ أو شوائب.

6. لا تضع منفذ الإشعاع بالقرب من الأشياء سهلة التمدد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز وتلفه.

7. لا تستخدم الجهاز إذا كانت فتحة التهوية مسدودة، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد دخان أو نشوب حريق.

8. لضمان التشغيل السليم، تجنب توجيه منفذ الإشعاع نحو الأجسام السوداء.

9. لتجنب التلف مثل السواد أو تغير اللون أو الكسر، لا تُشعّ الملابس أو الشعر أو أي أغراض أخرى.

10. هذا الجهاز غير مُصمم للاستخدام على الحيوانات الأليفة، فقد يُسبب لها إصابات.

11. قد يُسبب الجهاز تلفاً للعين (بما في ذلك احتمال الإصابة بالعمى) أو تلفاً للجلد إذا لم تُتبع التعليمات بدقة. اقرأ دائماً التعليمات المرفقة والتزم بها.

12. لا تستخدم الجهاز على الأسطح التي تتطلب استخداماً مكثفاً أو التي قد تؤدي إلى تراكم النبضات و/أو التردد المفرط، لأن ذلك قد يلحق الضرر بالجلد.

13. قد يُسبب سوء استخدام الجهاز ضرراً للعينين. احص عينيك دائماً من التعرض للجهاز وتجنب استخدامه بالقرب منهما.

14. قبل استخدام الجهاز، قم بإجراء اختبار حساسية على الجلد وتأكد من حالة الجلد بعد ساعتين. إذا لم تظهر أي أعراض غير طبيعية (مثل الاحمرار أو البثور) في المنطقة المعالجة، يُمكن استخدام المنتج.

١٥. أثناء الاستخدام، تأكد من ارتداء النظارات الواقية وتقريب نافذة المصباح من الجلد. لعملية إزالة الشعر.
١٦. بعد الاستخدام، امسح الشعر ومنتجات العناية بالبشرة العالقة بالجهاز لتجنب التلف وضمان الأداء السليم.
١٧. اتبع التعليمات بدقة وارتدِ النظارات الواقية بشكل صحيح لتجنب التحفيز الضوئي القوي.
١٨. اضبط شدة الإشعاع وفقاً لحالة بشرتك. ابدأ دائماً بالمستوى ١ عند الاستخدام الأول.
١٩. من الطبيعي أن يظهر الجلد احمراراً طفيفاً أو سخونة بعد الاستخدام.
٢٠. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله. أطفئه دائماً بعد الاستخدام.
٢١. نظف البشرة قبل الاستخدام للتأكد من خلوها من بقايا الشعر، وجفافها تماماً، وخلوها من المواد الدهنية أو البقع.
٢٢. في حال وجود فرق كبير في درجة الحرارة بين بيئة التشغيل وبيئة التشغيل (أكثر من ٢٠ درجة مئوية)، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حوالي ساعتين قبل استخدامه مرة أخرى.
٢٣. لا تستخدم الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل البخاخات، محطات الوقود، إلخ) لتجنب مخاطر الحريق أو الصعق الكهربائي.
٢٤. درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للجهاز تتراوح بين ٠ و٤٠ درجة مئوية. يرجى التأكد من أن درجة حرارة الغرفة ضمن هذا النطاق قبل الاستخدام.
٢٥. تجنب تعريض المنطقة المعالجة للأشعة فوق البنفسجية المباشرة لمدة ٢٤ ساعة بعد المعالجة.
٢٦. إذا لم تعمل المروحة المدمجة (أي لم تسمع صوت الطنين) بعد تشغيل الجهاز، لا تستخدمه لتجنب حدوث أعطال مثل الدخان أو الحريق.
٢٧. لا تستخدم الجهاز في حوض الاستحمام أو الدش أو أي مكان آخر قريب من الماء. حافظ على جفاف محول الطاقة في جميع الأوقات.
٢٨. لا يُنصح باستخدام المنتج لفترات طويلة. بعد استخدامه لمدة ساعة، أطفئ الجهاز واتركه يرتاح لمدة ١٠ دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.
٢٩. في حال تلف الغلاف أو العدسة أو مصدر الطاقة، توقف عن استخدام المنتج فوراً. لا تحاول إصلاح المنتج دون إذن. يجب إصلاحه بواسطة فنيين متخصصين من قسم الصيانة التابع للشركة المصنعة أو مركز خدمة مماثل.

1. يُرجى استخدام المنتج وفقاً للتعليمات الواردة في الدليل لضمان الاستخدام السليم والسلامة.
2. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل القاصرين دون سن ١٦ عاماً. يُرجى إبقاؤه بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة.
3. تماشياً مع التزامنا بالتنمية المستدامة، نحفظ بالحق في تحديث منتجاتنا أو تعديلها، بما في ذلك تغييرات في وظائفها أو واجهتها أو مظهرها.
4. نظراً لتحديثات المنتج، في حال وجود أي اختلاف بين الوصف والمنتج الفعلي، تُعتمد تفاصيل المنتج الفعلي.
5. لسلامتك، ارتدِ دائماً نظارات واقية عند استخدام هذا الجهاز، وحافظ على نافذة الفلاش بعيدة عن عينيك أثناء الاستخدام.

اختبار حساسية الجلد

قبل استخدام الجهاز على منطقة جديدة من الجسم، نوصي بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد. انتظر ٢٤ ساعة بعد الاختبار للتأكد من أن بشرتك مناسبة لعلاج IPL.

إعدادات شدة الضوء

ابدأ دائماً بأقل مستوى لشدة الضوء، ثم اختر من بين تسعة مستويات متوفرة بناءً على مستوى راحتك. خفّض الشدة إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج. الأشخاص ذوو البشرة الداكنة أكثر عرضة لتهيج الجلد بسبب زيادة امتصاص الضوء، لذا يُنصح باستخدام مستويات شدة منخفضة. لا ينبغي للأشخاص ذوي البشرة البنية الداكنة أو السوداء استخدام علاج IPL على الإطلاق. يُرجى الرجوع إلى جدول المستخدم أدناه.

Skin color \ Hair color	white	Like white	creamy white	Light brown	Beige	Dark brown black
						
Black 						
Dark brown 						
Brown 						
Golden 						
Gules 						
white 						
Grey 						



ملائم




غير قابل للتطبيق


التحضير قبل الاستخدام

١. نظفي البشرة جيدًا للتأكد من خلوها من الشعر، وجفافها التام، وخلوها من أي بقايا دهنية، بما في ذلك العطور، والكريمات، ومزيلات العرق، وواقي الشمس، أو أي مواد أخرى مشابهة.
٢. افحصي نافذة الفلاش للتأكد من خلوها من الأوساخ، والشعر، والشوائب. تحقق من وجود أي تلف أو عيوب. في حال وجود أي أوساخ، نظفي النافذة لمنع تعطل المنتج، أو تلفه، أو حدوث مشاكل جلدية.
٣. قومي باختبار حساسية الجلد وانتظري ٢٤ ساعة لتقييم حالة الجلد. إذا لم تُلاحظ أي ردود فعل غير طبيعية، مثل الاحمرار أو البثور، في المنطقة المعالجة، يمكن استخدام المنتج بأمان. لا يُنصح بإزالة الشعر قبل الانتهاء من اختبار حساسية الجلد.

١. استخدم شفرة حلاقة لإزالة الشعر من المناطق المراد معالجتها. لا تلامسي الجلد مباشرة بالشفرة. يُنصح باستخدام رغوة الحلاقة أو الحلاقة أثناء الاستحمام. نظراً لأن الشفرة حادة، استخدمها بحذر لتجنب خدش الجلد.

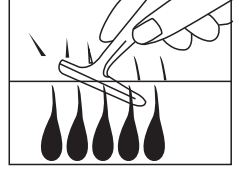

٢. نظفي مقبس الإضاءة ووصلي محول الطاقة.

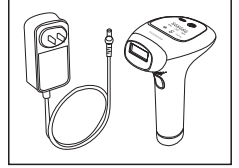


٣. اضغطي مطولاً أو ضغطة قصيرة على زر التشغيل لتشغيل الجهاز. بعد التشغيل، اضغطي على زر الثلج لتفعيل وضع التبريد بالثلج.




٤. ارتدي نظارات واقية لحماية عينيك قبل بدء عملية إزالة الشعر.



٥. ضعي الجهاز عمودياً على بشرتك، واضغطي على الزر مرة واحدة، ثم حركي المصباح إلى المنطقة التالية دون تداخل. استمري في تشغيل الجهاز في منطقة المعالجة بالترتيب.

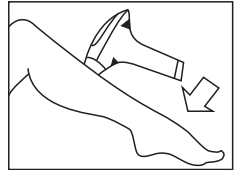

٦. من الطبيعي ظهور قطرات ماء على منطقة التبريد الخاصة بالمصباح أثناء وضع التبريد بالثلج. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة لمسح قطرات الماء بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

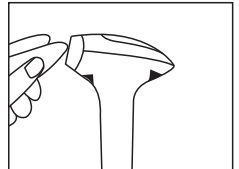

نصائح لإزالة الشعر

- a.** تُؤلّد الومضات المستمرة من جهاز إزالة الشعر حرارة. لتعزيز فعالية كمادات الثلج، يُنصح باستخدام رأس مصباح الثلج للضغط على المنطقة المُعالجة لمدة ٣٠ ثانية تقريبًا بعد إزالة الشعر. ثم انتقلي إلى المنطقة التالية. سيساعد ذلك على تهدئة البشرة وتحسين تأثير التبريد بالثلج.
- b.** اضعطي رأس المصباح بقوة على الجلد لضمان ملامسته الكاملة لجذر بصيلة الشعر. سيسمح ذلك لبصيلة الشعر بامتصاص المزيد من الطاقة، مما ينتج عنه علاج أكثر فعالية لإزالة الشعر. بفضل تقنية التبريد بالثلج، يُبرّد الجهاز البشرة بفعالية، ويُقلل الحرارة، ويوفر حماية أفضل للبشرة.

دليل جدول العلاج

- ١.** استخدمى الجهاز ٣ مرات أسبوعيًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. خلال هذه الفترة، يتباطأ نمو الشعر، ويقل بنسبة تزيد عن ٧٥%.
 - ٢.** استخدميه مرتين أسبوعيًا خلال الأسابيع من ٤ إلى ٦. يصبح الشعر أرق وأقل وضوحًا، وتصبح البشرة أكثر نعومة.
 - ٣.** بعد ٦ أسابيع، استخدمى الجهاز مرة أو مرتين شهريًا، حسب الحاجة، لتحقيق إزالة دائمة للشعر.
- ملاحظة:** يُرجى تعديل عدد مرات الاستخدام بناءً على سُمك الشعر وصلابته. يمكن زيادة أو تقليل مستوى الجهاز وعدد مرات الاستخدام وفقًا لذلك. قد يختلف جدول العلاج المحدد من شخص لآخر.

العناية بعد العلاج

- ١.** يُنصح بتجنب ملامسة الماء لمدة ٦ ساعات على الأقل بعد إزالة الشعر. بعد هذه المدة، يُنصح بترطيب المنطقة المعالجة بالماء.
- ٢.** لا تستخدمى العطور أو الأقنعة أو مستحضرات التجميل التي تحتوي على حبيبات تقشير بعد إزالة الشعر.
- ٣.** تجنبي التعرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة ٢٤ ساعة بعد العملية، واستخدمى واقي الشمس إذا لزم الأمر.
- ٤.** يُمنع استخدام أجهزة التسمير الاصطناعي أثناء جلسات إزالة الشعر.

٥. إذا كنت بحاجة إلى جراحة تجميلية في المنطقة المعالجة بعد إزالة الشعر، يُرجى استشارة الطبيب.

٦. في حال الشعور بأي انزعاج، توقف عن استخدام المنتج فوراً واستشير طبيبك.

التنظيف والصيانة

١. لضمان الأداء الأمثل وإطالة عمر المنتج، نظف قبل وبعد كل جلسة لإزالة الشعر لمنع تراكم الشعر والغبار على المدى الطويل. قد يؤثر عدم تنظيف المنتج بشكل صحيح على أدائه.

٢. قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء للسماح له بالتبريد. استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لمسح وتنظيف سطح منفذ الضوء.

٣. خزن الجهاز في بيئة جافة وخالية من الغبار، في درجة حرارة تتراوح بين ١٠ و ٦٠ درجة مئوية.

٤. لا تغسل الجهاز أو ملحقاته في صابون المياه أو غسالات الأطباق. تجنب استخدام الكرات المعدنية أو المنظفات الكاشطة (معجون الأسنان، إلخ) أو السوائل المسببة للتآكل (مثل البنزين وزيت المحرك والأسيتون، إلخ) لتنظيف المنتج.

ملاحظة: إذا لم يكن الماء وحده كافياً للتنظيف الفعال، يمكنك استخدام بضع قطرات من الكحول عالي التركيز (لا يزيد عن ٩٥٪) لتنظيف الأجزاء.

الأسئلة الشائعة

مشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيله	الجهاز غير موصل بشكل صحيح بمصدر الطاقة.	اترك الجهاز ليبرد قبل الاستخدام. ضع الجهاز على المنطقة المراد علاجها وانتظر ظهور رمز RA على الشاشة.

لا يعمل الوميض	قد تكون درجة حرارة المصباح أو الجهاز مرتفعة جدًا. قد لا يلامس رأس المصباح الجلد بشكل كامل.	تحقق من عمل مصدر الطاقة بشكل صحيح. إذا لم يكن كذلك، فقم بإصلاحه أو استبداله فورًا.
الشاشة لا تعرض أي شيء	قد يكون الجهاز معيَّبًا.	نظف الفلتر وأزل أي شعر. خفِّض مستوى الطاقة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
رائحة كريهة عند الوميض	قد يكون الفلتر متسخًا أو قد يكون هناك شعر متبقٍ على سطح الجلد.	قبل استخدام الجهاز، اخلق المنطقة المراد علاجها. إذا تسبب الحلاقة في تهيج الجلد أو الحساسية، فقم بقص الشعر لأقصر طول ممكن واستخدم الجهاز على مستوى شدة مريح.
ألم شديد أثناء إزالة الشعر	لم يتم حلاقة المنطقة المراد معالجتها بشكل صحيح.	اترك الجهاز ليبرد قبل الاستخدام. ضع الجهاز على المنطقة المراد علاجها وانتظر ظهور رمز RA على الشاشة.
	قد لا تكون المنطقة المراد معالجتها مناسبة لهذا المنتج.	تجنب استخدام الجهاز على المناطق الحساسة مثل الشفرين الداخليين، والمهبل، والشرج، والحلمات، والهالة، والوجه أو كيس الصفن.
	شدة الضوء مضبوطة على مستوى عالٍ جدًا.	خفِّض شدة الضوء إلى مستوى أكثر راحة.
	نافذة نفاذية الضوء تالفة.	إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، فقم بإصلاحه أو استبداله فورًا.
بعد إزالة الشعر، تتحول المنطقة التي أزيل منها الشعر إلى اللون الأحمر	الاحمرار الطفيف طبيعي وغير ضار، وسيزول بسرعة.	دلكي بشرتك بجل الصبار أو كمادة تُلج لتخفيف أي تهيج.

غير راض عن نتيجة إزالة الشعر	قد تكون شدة الضوء منخفضة جدًا بالنسبة لاحتياجاتك.	زيدي شدة الجهاز إذا للحصول على نتائج أفضل، ركزي على المناطق المتقاربة أثناء العلاج.
	لم يتم تطبيق الوميض على مناطق قريبة من مناطق سبق معالجتها.	تأكد من تداخل الوميضات في المناطق القريبة من بعضها البعض أثناء العلاج.
	قد لا يكون هذا الجهاز فعالاً على لون شعرك.	إذا كان شعرك أشقر، أو رمادي، أو أحمر، أو أبيض، فقد لا يكون الجهاز فعالاً.
	لم يتم استخدام الجهاز بشكل منتظم أو كافٍ.	لضمان إزالة الشعر بشكل صحيح، اتبعي جدول العلاج الموصى به.
	قد يكون رد فعلك بطيئاً تجاه التعرض للضوء.	استخدمي الجهاز باستمرار لمدة تصل إلى ٥ أشهر، حيث قد ينمو الشعر مجدداً.
يصبح المنتج ساخناً ورطباً أثناء الاستخدام	قد يؤدي الاستخدام المطول للجهاز إلى ارتفاع درجة حرارته.	بعد الاستخدام، أوقفي تشغيل الجهاز واتركيه جانباً. تأكدي من تبديد الحرارة بشكل صحيح قبل الاستخدام التالي.

التخلص

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)