

PORODO



Porodo

جهاز تدليك الرقبة شياتسو

SKU: PD-5DKSNM-YL

٢	المميزات
٢	التخزين والنقل
٣	عرض تخطيطي
٣	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٤	تنبيه
٤	الشحن
٤	تعليمات الاستخدام
٤	A. التشغيل/الإيقاف
٥	B. مؤشر البطارية
٥	احتياطات السلامة
٦	تحذير
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	اعتبارات التخلص من المنتج
٧	دليل إزالة البطارية
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات


١. كمادات ساخنة: يتميز جهاز تدليك الرقبة بإعداد كمادات ساخنة تعمل على تعزيز الاسترخاء وتخفيف توتر العضلات بالدفع.
٢. الاسترخاء العميق: يستخدم هذا الوضع تقنيات تدليك متقدمة لإرخاء العضلات بعمق وتخفيف التوتر.
٣. مواد صديقة للبشرة: مصنوعة من مواد لطيفة على بشرتك، مما يضمن الراحة أثناء كل استخدام.
٤. أوضاع التدليك: توفر إعدادات تدليك متعددة، مما يسمح لك بتخصيص شدة وأسلوب التدليك وفقًا لاحتياجاتك.
٥. حزام آمن قابل للتعديل: مزود بحزام قابل للتعديل يناسب بشكل آمن مجموعة من أحجام الرقبة، مما يضمن بقاء جهاز التدليك في مكانه.
٦. وقت عمل ٣ ساعات: يوفر ما يصل إلى ثلاث ساعات من الاستخدام المستمر بشحنة واحدة، وهو مثالي لجلسات الاسترخاء الطويلة.

التخزين والنقل

١. درجة الحرارة المحيطة: مناسبة لدرجات حرارة تتراوح من ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٠+ درجة مئوية.
٢. الضغط الجوي: يتراوح من ٥٠ كيلو باسكال إلى ١٠٦ كيلو باسكال.
٣. الرطوبة النسبية: لا ينبغي أن تتجاوز ٩٣٪.
٤. التخزين: يُخزن في منطقة جيدة التهوية، ومحمية من أشعة الشمس القوية والغازات المسببة للتآكل. في حالة تخزينه لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب فحص المنتج وإعادة شحنه.
٥. النقل: يتضمن المنتج ميزات أساسية مضادة للاهتزاز وهو مناسب للنقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحري. يُحمي من المطر والرذاذ والانقلاب والاصطدام.



عرض تخطيطي

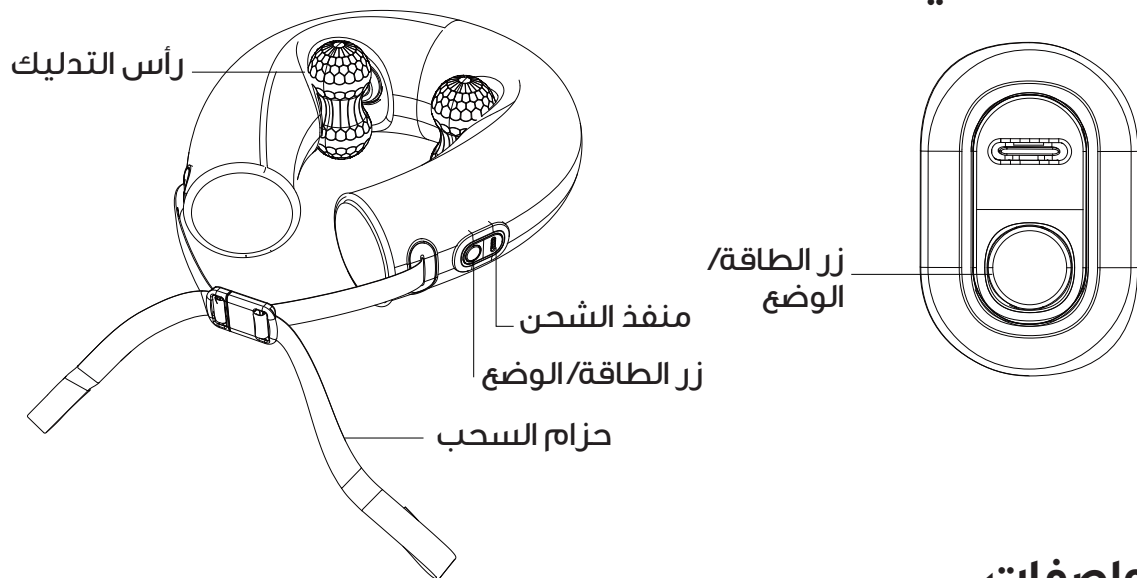

المواصفات

سعة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت إعادة الشحن	٤ ساعات
توقيت الجلسة	١٥ دقيقة
وقت العمل	٢٢٠ دقيقة
منفذ الشحن	النوع C
جهد الإدخال المقدر	٥ فولت
طاقة الإدخال المقدر	٦,٥ وات
المادة	جلد سويدي
الوزن الصافي	٨٤٠ جرام
أبعاد المنتج	٢٧٥×٢٥×٩٠ مم

محتويات العبوة

١. جهاز تدليك الرقبة

٢. كابل شحن من النوع C

١. استخدمه حسب الحاجة؛ لا ينبغي أن يتجاوز التشغيل المستمر ٣٠ دقيقة. يوصى بالسماح بفواصل زمني مناسب بين الجلسات.
٢. قد يؤدي الاستخدام المفرط إلى إزعاج جسدي وإصابة الجلد.
٣. عند استخدام الجهاز لأول مرة، راقب كيفية تفاعل جسمك وبشرتك، وفكر في تقصير مدة الاستخدام إذا لزم الأمر.
٤. بعد التدليك، قد تلاحظ احمرارًا وإحساسًا بالدفع في المنطقة؛ هذا أمر طبيعي وينبغي أن يهدأ بشكل طبيعي بعد مرور بعض الوقت.

الشحن

١. عندما يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر، فهذا يعني أن البطارية منخفضة. يُرجى شحن الجهاز على الفور.
 ٢. استخدم كابل الشحن من النوع C المرفق للشحن.
 ٣. أثناء الشحن، سيومض الضوء الأحمر. وبمجرد الشحن بالكامل، سيومض الضوء الأزرق.
- ملاحظة:** لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

تعليمات الاستخدام


A. التشغيل / الإيقاف

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ. سيضيء مؤشر الضوء الأزرق، مما يؤدي إلى تنشيط الوضع ١ (التدليك والتدفئة).
 ٢. تبديل الأوضاع: اضغط على زر الطاقة مرة واحدة للتبديل إلى الوضع ٢ (التدليك فقط). سيضيء مؤشر الضوء الأخضر. اضغط مرة أخرى للتبديل بين الوضعين.
 ٣. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ. سيطفئ مؤشر الضوء، مما يشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** بعد التشغيل، يعمل الجهاز لمدة ١٥ دقيقة قبل إيقاف تشغيله تلقائيًا. لمواصلة استخدامه، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

B. مؤشر البطارية


١. البطارية منخفضة: عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض زر الطاقة باللون الأحمر.
٢. الشحن: أثناء الشحن، سيومض الضوء الأحمر. عند الشحن بالكامل، سيومض الضوء الأزرق.

تعليمات الشد

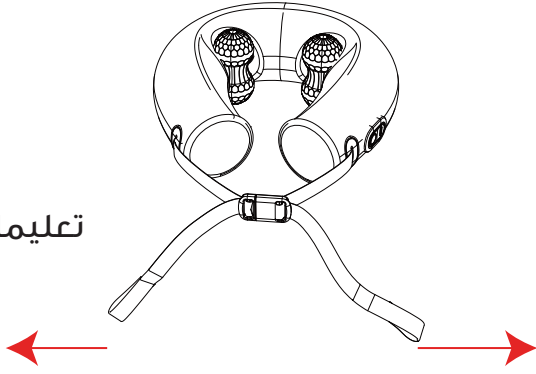

أمسك كل حزام بقوة بكلتا يديك واسحبه في اتجاهين متعاكسين.

تعليمات فك الحزام

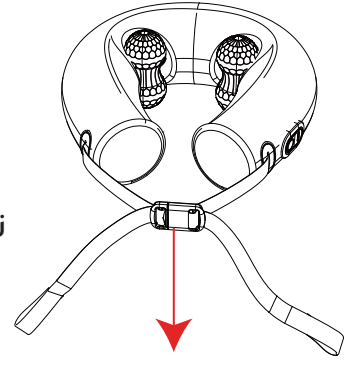

امسك الإبريم بيد واحدة ثم حركه للأمام.

احتياطات السلامة

١. قبل الاستخدام: راجع دليل التشغيل بعناية.

٢. ظروف التشغيل: تجنب استخدام هذا المنتج في البيئات الحارة أو القابلة للاشتعال أو الرطبة أو بالقرب من مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي.

٣. مدة الاستخدام: قم بالتشغيل حسب الحاجة ولكن لا تتجاوز ٣٠ دقيقة متواصلة. تأكد من وجود فترات زمنية كافية بين الجلسات لمنع آلام العضلات وعدم الراحة. راقب استجابة جسمك، وخاصة أثناء الاستخدام الأولي.

٤. بعد الاستخدام: من الطبيعي أن تشعر باحمرار أو دفء في منطقة التدليك وسوف يقل مع مرور الوقت. توقف عن الاستخدام واستشر مقدم الرعاية الصحية إذا حدث عدم راحة.

٥. حماية المحرك: لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك، تجنب تشغيل الجهاز بشكل مستمر لفترات طويلة.

٦. التفكيك: لا تقم بتفكيك أو إصلاح أو تغيير هذا المنتج دون إذن معتمد.

٧. مقاومة الماء: هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. تأكد من بقاءه جافًا في جميع الأوقات.

٨. الاستخدام المقصود: تم تصميم هذا المنتج للرعاية الصحية المنزلية وليس مخصصًا للتطبيقات التشخيصية أو العلاجية أو التجارية. توخ الحذر إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المواد التي يتكون منها المنتج.

٩. الأطفال والحيوانات الأليفة: احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و ١٢ عامًا استخدامهم تحت إشراف شخص بالغ فقط. قم بإزالة أي أشياء قريبة قد تتداخل مع المنتج قبل الاستخدام.

١٠. إيقاف التشغيل والتخزين: قم دائمًا بإيقاف تشغيل المنتج وفصله عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامه. قم بتخزين الجهاز في منطقة جافة وجيدة التهوية، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج.

١. تجنب استخدام هذا المنتج إذا كنت تعاني من إصابات جلدية أو التهاب أو احتقان أو أمراض جلدية أو أي إزعاج في المنطقة المراد تدليكها.
٢. لا تستخدمه إذا كنت تعاني من إصابات عضلية أو نزيف نشط أو جروح لم تلتئم تمامًا في منطقة التدليك.
٣. امتنع عن استخدام هذا المنتج إذا كنت تعاني من هشاشة العظام أو الكسور أو أي مشاكل متعلقة بالعظام في المنطقة المصابة.
٤. لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو تاريخ من الأورام الخبيثة أو ضعف الوظائف الحركية أو الإعاقات الإدراكية والجسدية.
٥. لا ينبغي للنساء الحوامل وضع هذا المنتج على مناطق الخصر والبطن. هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن ١٢ عامًا.
٦. تجنب استخدامه إذا كان لديك حساسية عالية للحرارة أو أثناء الحيض.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يبدأ	عدم كفاية طاقة البطارية	الشحن على الفور
لا يتم الشحن بشكل صحيح	مشاكل الاتصال أو تلف البطارية	فحص مصدر الطاقة الخارجي أو كبل USB اتصل بمحترفي الخدمة المعتمدين لاستبدال البطارية
يفشل في التشغيل	حماية كتلة الزناد أو عطل الدائرة	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التشغيل. إذا لم يبدأ التشغيل، فاتصل بمحترفي الخدمة المعتمدين.

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، يرجى التوقف عن استخدام الجهاز والاتصال بأخصائيي الخدمة المعتمدين. لا تحاول تفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك.

اعتبارات التخلص من المنتج

لمنع التلوث البيئي، يرجى الامتناع عن التخلص من هذا المنتج دون تمييز. التزم بلوائح حماية البيئة المحلية للتخلص من المنتج.

١. يجب إزالة البطارية من المنتج قبل التخلص منه.

٢. تأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل إزالة البطارية.

٣. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة، باتباع البروتوكولات البيئية المناسبة.

تحذير: لا ينبغي للموظفين غير المحترفين تفكيك المنتج بأنفسهم!

٤. لحماية البيئة، بمجرد اعتبار المنتج أو أجزائه غير صالحة للاستخدام، افصلها عن النفايات المنزلية العادية وانقلها إلى منشأة إعادة تدوير معتمدة. ستتولى هذه المنشأة فرز وتفكيك وإعادة تدوير وإعادة الاستخدام المحتملة وفقًا للوائح الوطنية.

دليل إزالة البطارية

١. افصل مصدر الطاقة الخارجي وأزل غلاف المنتج.

٢. أخرج البطارية.

٣. خذ البطارية إلى محطة إعادة التدوير.

٤. التزم بلوائح حماية البيئة المحلية عند التخلص من البطارية لحماية البيئة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**