

porodo | CHOOSE THE BEST

مطرقة التدليك المعالجة

SKU:PD-TMSHMR



كتيب التعليمات

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية.

جدول المحتويات

١	الضمان
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تفاصيل المنتج
٤	نطاق التطبيق
٥	إرشادات التشغيل
٦	احتياطات السلامة
٧	مواصفات المنتج
٧	الأسئلة المتكررة والحلول
٨	الأسئلة الشائعة وحلول الصيانة اليومية
٩	توصيات حول استخدام المنتج وتخزينه
١٠	إرشادات إعادة تدوير والتخلص من المنتج
١٢ - ١١	إرشادات التخلص من المنتج

شكرا لاختيارك منتجنا. نحن نقدر بصدق اختيارك ونحن هنا لدعمك. يرجى قراءة هذا الدليل جيدًا قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا واجهت أي مشاكل أثناء الاستخدام، فلا تتردد في التواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع لدينا، الذين يتوقعون لمساعدتك بالتفاني والرعاية.

نحن نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا؛ لذلك، من المهم ملاحظة أنه قد يتم تحديث محتوى الدليل بشكل دوري ليعكس التحسينات. ملاحظاتك محل تقدير كبير، ونحن نرحب بأي اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، من فضلك

اتصل بنا على: info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام : [porodo](https://www.instagram.com/porodo)

نظرة عامة على المنتج

تتضمن مطرقة التدليك العلاجية مجموعة من رؤوس التدليك الاحترافية ذات قوة عالية التردد وسعة 10 مم لتقديم تجربة تدليك قوية وخالية من الألم. يضمن المقبض الممتد المصمم هندسيًا الوصول غير المقيد إلى جميع مناطق الجسم، مما يتيح تدليكًا شاملاً لكامل الجسم.

مثالي لاجل:

- *الأفراد الذين يقضون فترات طويلة أمام الكمبيوتر.
- *أولئك الذين غالبًا ما يحافظون على نفس الوضعية.
- *الأشخاص الذين يعانون من العصبية أو الأرق أو الأرق.
- *كل من يعاني من توتر في الرقبة والكتف، أو تعب في العضلات، أو آلام.
- *الأشخاص الذين يعانون من تنميل أو ضعف في اليدين.
- *الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الدورة الدموية الدماغية مما يؤدي إلى الصداع.

الفوائد الرئيسية:



سعة 10 مم لتحفيز
الأنسجة العميقة.



تدليك عالي التردد ومنخفض
الاهتزاز من أجل الراحة.



تصميم مريح لسهولة
الاستخدام وتعدد
الاستخدامات.



مستويات كثافة متعددة
لقوة التدليك الشخصية.



تصميم يقلل الحاجة إلى حمل
الجهاز يدويًا.




مجموعة متنوعة من رؤوس
التدليك لتوفير الراحة
المستهدفة.

تفاصيل المنتج

قبل الاستخدام، يرجى التأكد من سلامة مطرقة التدليك وكابل الشحن وجميع الملحقات. للحصول على الأداء الأمثل، قم بشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأولي. إذا لاحظت أي ضرر، فلا تحاول إصلاح المنتج أو تفكيكه بنفسك؛ بدلاً من ذلك، اتصل بالبائع على الفور.

رسم توضيحي للمنتج

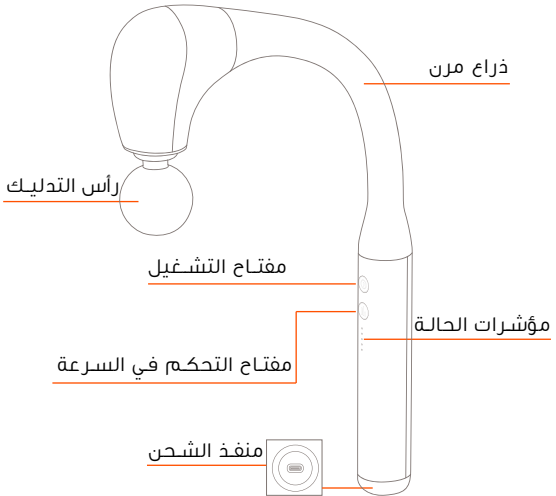


كابل شحن من النوع C

● للشحن، استخدم محول 5 فولت/2 أمبير، وتأكد من استخدام الكابل المرفق مع هذا المنتج.



تطبيقات الرأسوس الموصى بها للتدليك

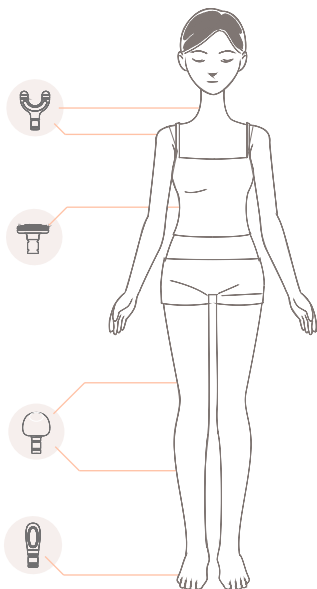

● رأس بشكل ل: مثالي للرقبة، العمود الفقري، الكعب، والساقين.

● رأس مسطح: الأفضل للاسترخاء وتدليك المجموعات الكبيرة من العضلات مثل الظهر والكتفين.

● رأس كروي: مناسب للأذرع، الخصر، الجهة الخلفية، الفخذين، والساقين.

● رأس بشكل رصاصة: مصمم لتأثير الأنسجة العميقة في مناطق مثل الطرق الحريرية، والكفوف، والقدمين.

إرشادات التشغيل

١. التشغيل / الإيقاف:

- قم بتنشيط الجهاز عن طريق الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 2 ثانية. بشكل افتراضي، سيبدأ الجهاز عند الإعداد الأول للتشغيل.
- لإيقاف التشغيل، قم بالضغط المطول على نفس الزر لمدة 2 ثانية أثناء تشغيل الجهاز.

٢. تبديل السرعات:

- الضغط القصير على مفتاح التحكم في السرعة لمدة ثانية واحدة لتغيير السرعة.
- تتابع السرعات دورة تسلسلية: السرعة الأولى إلى الثانية، حتى الخامسة، ثم العودة إلى الأولى.

٣. مؤشر الطاقة المنخفضة:

- ستومض خمسة أضواء LEDs بسرعة لمدة ١٠ ثوان عندما تكون الطاقة منخفضة.
- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا عند نفاذ البطارية.

٤. مؤشر الشحن:

- أثناء الشحن، ستومض مؤشرات الحالة تدريجياً. لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
- تظل جميع مؤشرات الحالة مضاءة بشكل ثابت عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل.

٥. إيقاف تلقائي:

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 15 دقيقة من الاستخدام المستمر.

١. قم بإزالة أي مجوهرات أو أشياء قد تعيق عملية التدليك قبل استخدام الجهاز.
٢. لا تستخدم الجهاز إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية مؤخرًا.
٣. تجنب استخدام الجهاز على الجلد التالف أو المناطق المصابة بالتورم أو الاحمرار أو الالتهاب أو الكدمات.
٤. يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب أو الأمراض الحادة أو الأمراض الجلدية أو الأورام أو التشوهات الجسدية الامتناع عن استخدام هذا الجهاز.
٥. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل اضطرابات النزيف أو هشاشة العظام أو أمراض الأنسجة الرخوة أو السكتة الدماغية عدم استخدام هذا الجهاز.
٦. استخدمه بحذر إذا كنت حاملًا، أو طفلًا، أو شخصًا بالغًا يعاني من صعوبة في الحركة، أو شخصًا مسنًا.
٧. لا تقم بتشغيل الجهاز أثناء المشي أو القيادة.
٨. توقف عن الاستخدام فورًا إذا شعرت بتوسع واستشر الطبيب.
٩. هذا المنتج ليس بديلًا للعلاجات أو الأجهزة الطبية.

اسم الجهاز	مطرقة تدليك الأخصائي
النموذج	PD-TMSHMR
الحجم	345.5 × 211 × 59.3 ملم
الوزن	تقريبًا 490 جرام
سعة البطارية	1500 مللي أمبير في الساعة
الجهد التشغيلي	7.4 فولت
الجهد المقدر	5 فولت -- 2 أمبير
القوة	2 أمبير / 15 وات
مدة الحركة	10 ملم
المواد	ABS, سيليكون

الأسئلة المتداولة والحلول

*إذا واجهت مشاكل مع المنتج، راجع هذه الإرشادات لحلها:

١. إذا لم يتم تشغيل الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض الطاقة. اشحن الجهاز قبل محاولة استخدامه مرة أخرى.

٢. في حالة فشل شحن الجهاز، تأكد من توصيله بشكل صحيح أو حاول استخدام مصدر طاقة مختلف.

٣. إذا توقف الجهاز أثناء الاستخدام، فمن الممكن أن يكون ذلك بسبب إيقاف التشغيل المبرمج أو انخفاض مستوى البطارية. أعد شحن الجهاز على الفور وأعد تشغيله.

القضايا المشتركة والعلاجات

١. في حالة حدوث خطأ مستمر أو إذا كان المنتج غير قابل للاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتصل بالبائع للحصول على الدعم.
٢. يجب على المستخدمين عدم تفكيك أو محاولة الإصلاح. سيؤدي التلاعب غير المصرح به إلى إبطال الضمان ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر يحدث.
٣. قد يؤدي عدم اتباع دليل التعليمات إلى تنازل الشركة عن مسؤوليتها عن أي ضرر ناتج.

صيانة المنتج اليومية

١. تجنب تنظيف الجهاز أثناء الشحن. قم دائمًا بإيقاف التشغيل قبل التنظيف لمنع الضرر.
٢. للتنظيف الروتيني، امسحه بلطف بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم الأدوات الكاشطة أو المواد الكيميائية القاسية.
٣. قم بحماية منفذ الشحن بغطاء من السيليكون لمنع دخول الماء. تأكد من أن المنفذ جاف وخالي من الحطام قبل توصيله بالطاقة.

توصيات استخدام المنتج وتخزينه

١. لا تعمل في درجات حرارة شديدة، أو رطوبة عالية، أو بالقرب من اللهب المكشوف، أو تحت أشعة الشمس المباشرة، أو في المناطق ذات المجالات الكهرومغناطيسية القوية.

٢. تجنب استخدام الجهاز أثناء الحركة مثل المشي أو القيادة.

٣. احفظ الجهاز بعيدًا عن البيئات المتربة أو المسببة للتآكل.

٤. ضع ضغطًا لطيفًا أثناء الاستخدام لمنع السقوط أو التلف.

٥. لا ينبغي استخدام الأشياء الحادة مع المنتج.

٦. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

٧. بعد الاستخدام، قم بتخزين المنتج في مكان آمن بعيدًا عن الأشياء الثقيلة.

٨. عند عدم الاستخدام، احتفظ بالجهاز في منطقة جافة وجيدة التهوية بعيدًا عن مخاطر الحرائق المحتملة.

٩. في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة شحنه بشكل دوري كل شهرين.

إرشادات إعادة تدوير المنتجات والتخلص منها

عندما يحين وقت التخلص من هذا المنتج، فمن الضروري القيام بذلك بطريقة مسؤولة لحماية البيئة. كمستهلك، أنت مكلف بفصل المنتج عن النفايات المنزلية وتسليمه إلى محطة إعادة التدوير المعتمدة. وهناك، ستتم معالجتها وإعادة تدويرها وفقاً للوائح الوطنية المعمول بها.

المواد الخطرة في مكونات المنتج						اسم الجزء
(PBDEs)	(PBBs)	(Cr(VI))	(Cd)	(Hg)	(Pb)	
○	○	○	○	○	○	حزمة البطارية
○	○	○	○	○	○	مكونات الأسلاك
○	○	○	○	○	○	مكونات البلاستيك
○	○	○	○	○	○	كابل الشحن
○ : يلاحظ أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من متطلبات الحد المحددة في 26572-2011 GB / T. ✗ : يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة للمكون يتجاوز متطلبات الحد المحددة في 26572-GB / T 2017.						
في ظل ظروف الاستخدام العادية، يتمتع هذا المنتج بعمر خدمة حماية البيئة يصل إلى 10 سنوات. ويمكن استخدامه بأمان خلال هذه الفترة الممتدة على مدى عقد من الزمن. بمجرد انتهاء فترة الخدمة، يجب إعادة تدوير المنتج بشكل مناسب.						

إرشادات للتخلص من المنتج

- المكونات غير المفصلة في جدول المواد الخطرة، وكذلك المواد المتجانسة فيها، غير سامة وآمنة للاستخدام.
- جميع الأجزاء المذكورة، التي تحتوي على مواد خطرة، تتوافق مع معايير RoHS الصينية لتقييد المواد الخطرة، مما يضمن أنها آمنة للاستخدام.
- إعادة تدوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن (بطارية ليثيوم أيون)

البطارية الموجودة في هذا المنتج عبارة عن بطارية متخصصة قابلة لإعادة الشحن، ولا ينبغي استخدامها في منتجات أخرى أو شحنها خارج المنتج. لضمان السلامة: * لا تعرض البطارية للحرارة الشديدة أو النار. * تجنب الثقب أو استخدام القوة المفرطة التي قد تؤدي إلى تلف البطارية أو تحللها. * لا تقم مطلقاً بقصر دائرة البطارية عن طريق توصيل الأطراف الموجبة والسالبة مباشرة. * قم بتخزين البطارية بعيداً عن العناصر مثل القلائد ودبابيس الشعر التي قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي. * امتنع عن شحن البطارية أو استخدامها في بيئات ذات درجة حرارة عالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها أو تلفها.	
* احتفظ بالبطارية القابلة لإعادة الشحن بعيداً عن متناول الأطفال لمنع أي خطر البلع أو حوادث أخرى. * في حالة حدوث تسرب بالبطارية، لا تلمس السائل. في حالة ملامسة أي سائل من البطارية للجلد أو العينين، اشطفهما جيداً بالماء واطلب الرعاية الطبية على الفور. * تخلص من المنتج بطريقة مسؤولة لمنع الضرر البيئي. إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح، فهناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو حوادث أخرى.	

ملاحظات حول التخلص من المنتج

بطارية الليثيوم أيون الموجودة في هذا الجهاز قابلة لإعادة التدوير. يرجى التأكد من التخلص من البطارية بشكل صحيح في منظمة متخصصة في إعادة تدوير البطاريات.

- * يجب استخراج البطارية من المنتج قبل التخلص منه.
- * يجب إيقاف تشغيل المنتج قبل إزالة البطارية.
- * التخلص من البطارية بشكل آمن وآمن.

خطوات إزالة البطارية

١. استخدم أدوات احترافية لقطع غلاف السيليكون الخاص بالمقبض.
٢. قم بفك برغي تثبيت المقبض باستخدام مفك البراغي.
٣. قم بفك المسمار الموجود على لوحة الدائرة.
٤. قم بقطع سلك البطارية بالمقص.
٥. أخيرًا، قم بإزالة البطارية من الجهاز.