



porodo | CHOOSE THE BEST
Hammering Waist Massager
SKU:PD-HMRWMS

عزيزي العميل

شكراً لك على اختيار مدلك الخصر الخاص بنا. للاستخدام الأمثل ولضمان طول العمر، يرجى التعرف على هذا الدليل والاحتفاظ به كمرجع.

نظرة عامة على المنتج

يستخدم مدلك الخصر لدينا تقنية الطرق الميكانيكية لتخفيف العضلات حول خصرك بلطف، مما يعزز الاسترخاء. هذا التصميم المدمج مناسب للارتداء ويعمل بمثابة رفيق تدليك ممتاز للاستخدام المنزلي.

مواصفات المنتج

الاسم	مدلك الخصر
الطرز	PD-HMRWMS
الأبعاد	210 x 80 x 98 ملم
حجم العبوة	229 x 109 x 111 ملم
قدرة البطارية	2000 مللي أمبير
تردد الاهتزاز	50 هرتز
مساهمة الجهد	5 فولت (تيار مستمر)
استهلاك الطاقة	7.4 واط
جهد التشغيل	7.4 فولت
التردد عن بعد	2.4 جرام
المادة	بلاستيك ABS
الوزن	حوالي 717.5 جرام

تعليمات الاستخدام

عملية الشحن
– عندما يتحول ضوء مؤشر جهاز التدليك إلى اللون الأحمر ويومض، فإنه يشير إلى أن مستوى البطارية منخفض ويحتاج إلى إعادة الشحن. نوصي باستخدام كابل الشحن من النوع C المرفق لهذا الغرض. سيُعلمك الضوء الأزرق الموجود على المؤشر بمجرد شحن البطارية بالكامل. يرجى ملاحظة أنه لا يمكن تشغيل جهاز التدليك أثناء الشحن.

تعليمات التشغيل
١. ضع جهاز التدليك على المنطقة المرغوبة باستخدام الحزام واضبطه للحصول على الراحة، مع الرجوع إلى صورة الاستخدام المتوفرة.

٢. لبدء تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ. اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة بمجرد تشغيله للتبديل بين شدة التدليك العشرة المتاحة.

٣. عند بدء التشغيل، يكون الجهاز افتراضياً على الوضع 1. اضغط على زر الطاقة للتنقل عبر خمسة أوضاع متميزة، كل منها مقترن بتسلسل صوتي فريد: fa، re، mi، do، وهكذا.

٤. للتشغيل عن بعد، اضغط على الزر M لتغيير الأوضاع: زائد (+) أو ناقص (-) لضبط الكثافة، مع ثماني خيارات متاحة.


٥. تم تصميم جهاز التدليك ليعمل لمدة ١٥ دقيقة وسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد هذه الفترة.

٦. لإيقاف تشغيل جهاز التدليك، سواء على الجهاز أو عبر جهاز التحكم عن بعد، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة المعني لمدة 3 ثوانٍ.



المعينات البصرية


قم بالتحريك لضبط الحزام ليناسب بشكل مريح.

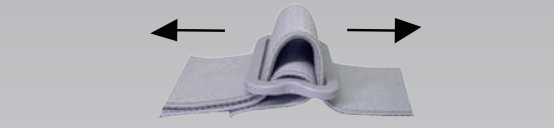

حزام قابل للتعديل
زر الطاقة/الوضع




الجزء الأمامي
مطرقة التدليك
مطرقة التدليك

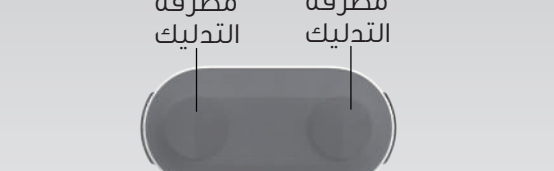

الجزء الخلف

آلية الإبريزيم المغناطيسي

ادفع للداخل للفصل واسحب للأعلى لتأمين الإبريزيم.

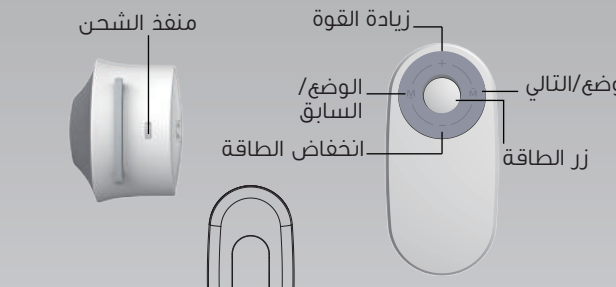

جهاز التحكم عن بعد الرؤية الخلفية

جهاز التحكم عن بعد الخلف الخلفية

ادفع للأسفل

ادفع للأعلى

بطارية ليثيوم CR2032

موقع البطارية

موقع البطارية

موقع البطارية

موقع البطارية

موقع البطارية

موقع البطارية

موقع البطارية

٥. يستخدم هذا الجهاز بطارية الليثيوم، للحفاظ على صحة البطارية المثالية، يرجى إعادة شحن البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لأكثر من ثلاثة أشهر لمنع استنفاد الطاقة بسبب عدم النشاط لفترة طويلة.

إرشادات السلامة

١. يرجى مراجعة دليل التشغيل جيداً قبل الاستخدام لضمان سلامة المنتج وعمله بشكل سليم.

٢. تجنب استخدام المنتج في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة أو المواد القابلة للاشتعال أو المجالات الكهربائية والمغناطيسية القوية أو الرطوبة الزائدة.

٣. ينصح بعدم استخدام المنتج بشكل مفرط أو لفترات طويلة لمنع تآكل المحرك الذي قد يؤدي إلى تلفه.

٤. لا تحاول إصلاح المنتج أو تفكيكه دون توجيهات مهنية لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه أو أضرار أخرى.

٥. المنتج غير مصمم لمقاومة الماء؛ وبالتالي، تأكد من عدم دخول الماء إلى الجهاز.

٦. هذا المنتج عبارة عن أداة مساعدة صحية إلكترونية للاستخدام المنزلي وليس مخصصاً للتشخيص الطبي أو العلاج أو التطبيقات التجارية.

٧. توخي الحذر إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المواد المستخدمة في هذا المنتج.

تحذير

١. لا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من إصابات جلدية أو التهابات أو احتقان أو أمراض جلدية أو حالات حساسة أخرى في موقع التدليك.

٢. تجنب استخدام المنتج في المناطق التي تعاني من إصابات في العضلات أو نزيف أو جروح في طور الشفاء أو أي نقاط ضعف جسدية أخرى.

٣. هذا المنتج غير مناسب للأفراد الذين يعانون من حالات بدنية معينة مثل هشاشة العظام أو الكسور أو إصابات العظام الشديدة في موقع التدليك.

٤. يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ طبي من أمراض القلب أو الأورام أو الإعاقات الجسدية الشديدة أو الإعاقات العقلية الامتناع عن استخدام هذا الجهاز.

٥. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأفراد الحوامل أو الذين يعانون من الدورة الشهرية.

٦. نوصي بهذا المنتج للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

٧. لا ينصح به للأشخاص الذين لديهم حساسية عالية للحرارة.

دليل اصلاح الأخطاء

إذا ظهرت مشكلة أثناء الاستخدام، فيرجى اتباع هذه الخطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا استمرت المشكلة أو فشل المنتج في العمل بشكل طبيعي، فاتصل بقسم خدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة.

مشكلة	سبب محتمل	الحل
لم يتم تشغيل الجهاز.	تم استنفاد البطارية.	قم بشحن البطارية على الفور.
لم يتم شحن الجهاز.	مشكلة في الشحن أو خلل في البطارية.	تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح بمصدر الطاقة أو استشر الشركة المصنعة لاستبدال البطارية.
الجهاز لا يستجيب.	عطل في البرامج أو الأجهزة.	أعد ضبط الجهاز بالضغط على زر الطاقة لمدة ٣٥ ثانية.

توصيات الصيانة

لضمان طول عمر منتجك، اتبع إجراءات الحماية هذه. قم بتخزين الجهاز في مكان آمن ولا تضع أشياء ثقيلة فوقه. في حالة حدوث عطل، اطلب خدمات إصلاح احترافية.

بيئة التشغيل

-درجة الحرارة: من 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
-الضغط: 86 كيلو باسكال – 106 كيلو باسكال
-الرطوبة: أقل من 80%

ظروف التخزين والنقل

-نطاق درجة الحرارة: -20 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية
-نطاق الضغط: 50 كيلو باسكال – 106 كيلو باسكال
-الرطوبة: أقل من 93%

-التخزين: يخزن في منطقة جيدة التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس الشديدة والغازات المسببة للتآكل. إذا تم الاحتفاظ بالمنتج في المخزن لأكثر من ثلاثة أشهر، فيجب إعادة شحنه.
-النقل: تم تصميم المنتج لتحمل ضغوط النقل الأساسية. تجنب تعريضه للمطر والثلج والتأثيرات الجسدية.

المسؤولية البيئية

لمنع الضرر البيئي، لا ينبغي التخلص من هذا المنتج بلا مبالاة. اتبع اللوائح البيئية المحلية للتخلص من: قم دائماً بإزالة البطارية من المنتج قبل التخلص منه.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل المنتج عند إخراج البطارية.

٣. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

يجب على الأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية أن يحولوا تفكيك المنتج.

إرشادات إزالة البطارية

١. افصل المنتج عن أي مصادر طاقة خارجية قبل المتابعة.
٢. قم بإيقاف تشغيل البطارية.
٣. قم بإزالة البطارية من المنتج بعناية.
٤. تخلص من البطارية بشكل مسؤول في منشأة إعادة التدوير المخصصة.
٥. الالتزام بالقوانين البيئية المحلية ولوائح التخلص لحماية النظام البيئي.

بروتوكول إعادة تدوير المنتجات والمكونات

بعد الاستخدام، يجب فصل المنتج ومكوناته عن النفايات العادية. تأكد من إرسالها إلى منشأة إعادة تدوير معتمدة لفرضها وتفكيكها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها بشكل مناسب، بما يتوافق مع اللوائح البيئية الوطنية.

تواصل معنا

–إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
–الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
–خدمة العملاء: support@porodo.net
–انستغرام: Porodo