

PORODO
LIFESTYLE





Porodo Lifestyle

جهاز توزيع زيت الشعر

EMS والضوء الأحمر


SKU:PD-LFST125

٢	منظر تخطيطي
٣	وصف المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٥	نصائح مهمة
٥	المواصفات
٥	محتويات العبوة
٦	الاحتياطات
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

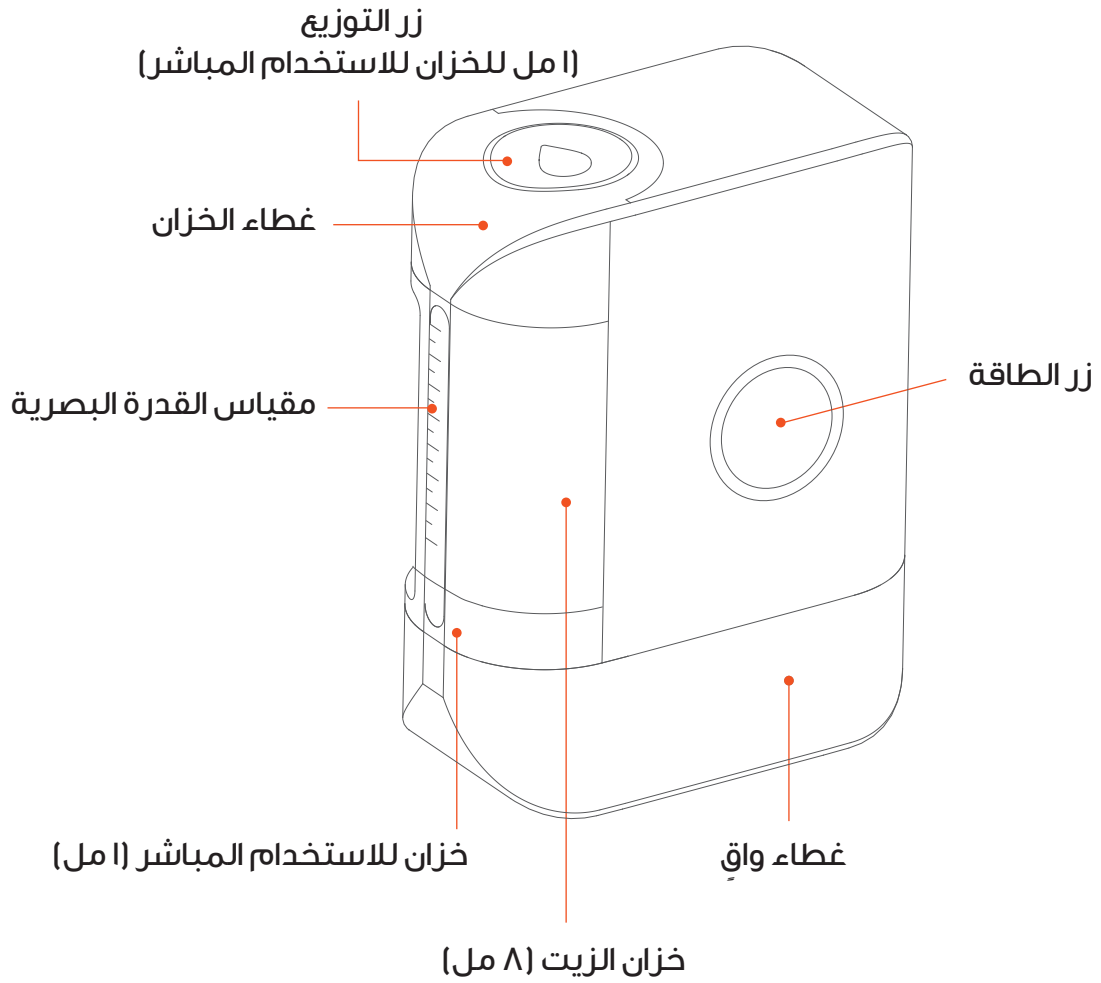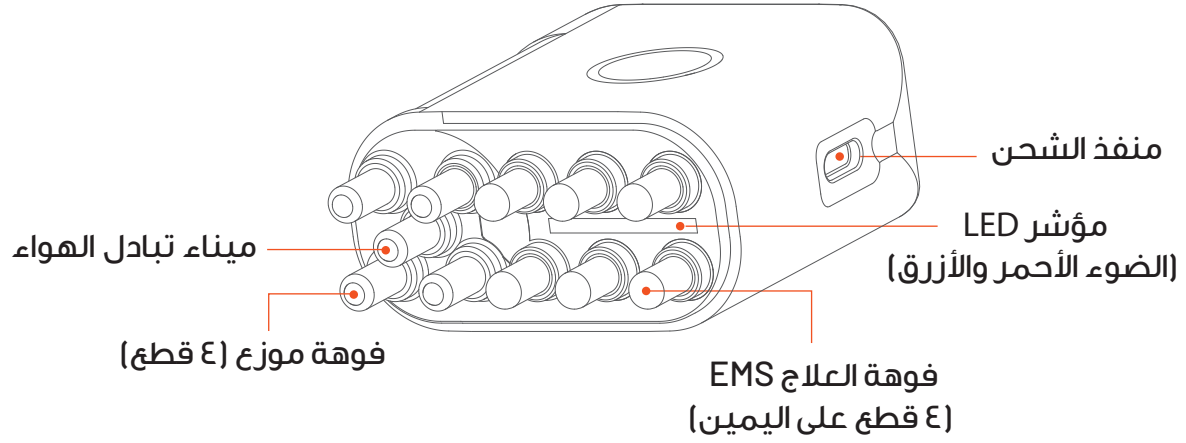


١. مصممة بموزع ناعم وقابل للسحب برأس كروي، يُفرّق الشعر بشكل طبيعي ويتوافق مع فروة الرأس، حيث توزع هذه الفرشاة زيت الشعر بالتساوي على الجذور مع تحفيز فروة الرأس وبصيلات الشعر.
٢. بفضل فوهات التوزيع الأكبر، تُمكن الفرشاة من توزيع الزيت بسلاسة وفعالية أكبر.
٣. بالضغط على زر الخزان، يتم توزيع ١ مل من الزيت في خزان الاستخدام المباشر، مما يضمن جرعة دقيقة وسهلة الاستخدام.
٤. مزودة بخزان قابل للإزالة لسهولة التعبئة والتنظيف.
٥. توفر وضعين للاختيار من بينهما: وضع تغذية الشعر ووضع تجديد الشعر.
٦. تُهدئ فروة الرأس بفعالية وتُعزز صحة بصيلات الشعر، لتكون بمثابة أداة سهلة الاستخدام للعناية بالشعر في متناول يديك.


تعليمات الاستخدام

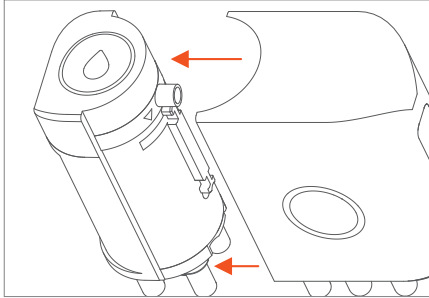


١. انزع غطاء الخزان، ثم اضغط عليه برفق واسحبه للخارج لفصله عن الوحدة الرئيسية.

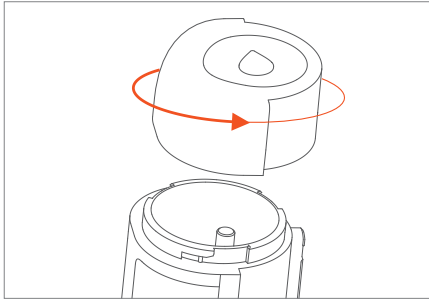


٢. أدر غطاء الخزان عكس اتجاه عقارب الساعة من وضع الإغلاق إلى وضع الفتحة.

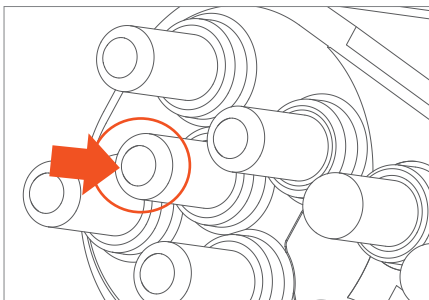


٣. املاً الخزان بمحلول الشعر (بحد أقصى ٨ مل)، ثم أغلق الغطاء بإحكام. إذا تسبب ارتفاع ضغط الهواء في خزان الاستخدام المباشر في فيضان المحلول أثناء الاستخدام، فاضغط على فوهة تبادل الهواء لتخفيف الضغط.

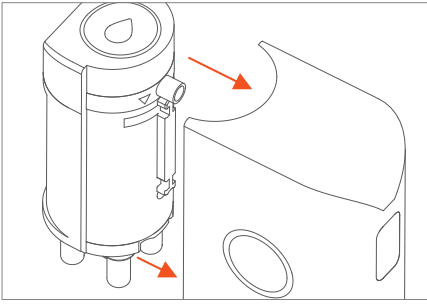

٤. أعد تركيب الخزان على الوحدة الرئيسية. اضغط عليه برفق حتى تسمع صوت طقطقة، مما يدل على التركيب الصحيح.

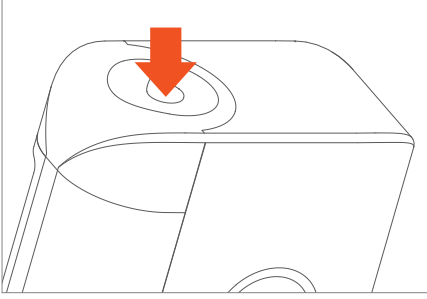


٥. اضغط على الزر لتوزيع امل من المحلول في خزان الاستخدام المباشر. اترك الزر بعد امتلاء الخزان.

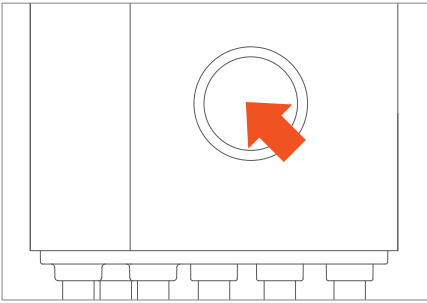

٦. اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه. بعد تشغيل الجهاز، اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل للتبديل بين الأوضاع واختيار الإعداد المطلوب:

- وضع تغذية الشعر: العلاج بالضوء الأحمر، تدليك بالاهتزاز، EMS المستوى ١
- وضع تجديد الشعر: العلاج بالضوء الأحمر والأزرق المختلط، تدليك بالاهتزاز، EMS المستوى ٢

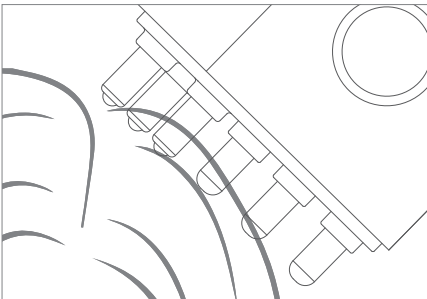

٧. أمسكي الفرشاة واطركي الفوهات تلامس فروة الرأس. اضغطي برفق، ثم اضغطي واسحبي أو انقري لتوزيع المحلول بالتساوي على فروة الرأس. بعد الاستخدام، نظفي الفرشاة واشطفي خزانها، وتأكدي من جفافه تمامًا قبل تخزينه.

١. الجهاز مزود بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي لمدة ٥ دقائق.
٢. يومض مؤشر LED عند انخفاض مستوى شحن البطارية. يُرجى شحن الجهاز فورًا.
٣. أثناء الشحن، يبقى مؤشر LED أحمر اللون. بعد اكتمال الشحن، يتحول إلى اللون الأخضر.
٤. ستتوقف الفرشاة عن العمل في حال فصل الخزان عن الوحدة الرئيسية.

المواصفات

سعة البطارية	١٥٠ مللي أمبير/ ساعة
جهد التشغيل	٣.٧ فولت
جهد الشحن	تيار مستمر ٥ فولت
سعة الخزان	٩ مل
واجهة الشحن	نوع C
معدل مقاومة الماء	IPX٥
مستويات EMS	مستويان
الوزن الصافي	٩١ غرام
حجم المنتج	٥٥ × ٧٠ × ٢٨ مم
رقم الموديل	LFS١٢٥

محتويات العبوة

١. أداة توزيع زيت الشعر
٢. كابل شحن

١. أغلق الغطاء فورًا بعد إضافة المحلول. عند التخزين، ضع الجهاز على الغطاء الواقي للمشط.
٢. بعد استخدام المحلول الموجود في الخزان، أخرجه ونظفه.
- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تبخر المحلول المتبقي وتبلوره، مما قد يؤدي إلى انسداد فوهات الموزع والتأثير على وظيفة التوزيع.
٣. تجنب ضرب فوهات الموزع بأشياء صلبة. أي تشوه قد يؤثر على فعالية التوزيع أو يسبب ضررًا لا رجعة فيه.
٤. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
٥. عندما تضعف أضواء LED والاهتزاز بشكل ملحوظ، مما يشير إلى انخفاض الطاقة، اشحن الجهاز على الفور.
٦. عند حمل الجهاز، تأكد من أن المحلول الموجود في خزان الاستخدام المباشر فارغ.
٧. أعد دائمًا غطاء منفذ الشحن الواقي عند حمل الجهاز أو تنظيفه.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**