

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

W-SONIC فرشاة أسنان كهربائية

SKU: PDLFST200BK

٢	معلومات هامة عن السلامة
٢	محظورات الاستخدام المهمة
٣	منظر تخطيطي
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٤	الوظيفة والوضع
٥	شحن المنتج
٦	تحذير من الخطر
٦	الصيانة
٧	بيان حماية البيئة
٧	الضمان
٧	اتصل بنا


١. يُرجى قراءة هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.
٢. إذا خضعتَ لجراحة في الفم أو اللثة خلال الشهرين الماضيين، فاستشر طبيب أسنانك قبل الاستخدام.
٣. إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر، فاستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز قبل الاستخدام.
٤. استخدم فقط رؤوس فرشاة الأسنان الموصى بها من قبل شركتنا.
٥. صُمم هذا المنتج خصيصاً لتنظيف الأسنان واللثة، ويجب عدم استخدامه لأي غرض آخر.
٦. هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الرضع أو أي شخص غير قادر على استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية.
٧. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع، ولا تستخدمه كلعبة.
٨. لمنع نمو البكتيريا على الشعيرات والحفاظ على صحة الفم، استبدل رأس الفرشاة كل ثلاثة أشهر.
٩. عندما تبدو الشعيرات مهترئة أو متأكلة، يُنصح باستبدال رأس الفرشاة على الفور.

محظورات الاستخدام المهمة

١. لا تستخدم المنتج إذا كان تالفاً بشكل واضح قبل الاستخدام.
٢. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تضعه في النار، أو تسخنه، أو تشحنه بشكل غير صحيح، أو تستخدمه في درجات حرارة عالية.
٣. يُحظر كسر هذا المنتج، أو تعديله، أو تفكيكه، أو إصلاحه بنفسك.
٤. اشحن هذا المنتج فقط في نطاق درجة حرارة يتراوح بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية.
٥. عند إزالة البطارية، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج.
٦. يجب التعامل مع البطاريات بحذر والتخلص منها بشكل صحيح.

ملاحظة:


من الطبيعي الشعور بوخز خفيف أو نزيف طفيف في الأسنان السليمة أثناء الاستخدام الأول لفرشاة الأسنان الكهربائية، لأن أسنانك لم تعتد بعد على هذا التحفيز. عادةً ما تختفي هذه الحالة في غضون أسبوعين إلى أسبوع واحد. إذا استمرت لأكثر من أسبوعين، فيُرجى التوقف عن الاستخدام واستشارة طبيب الأسنان.

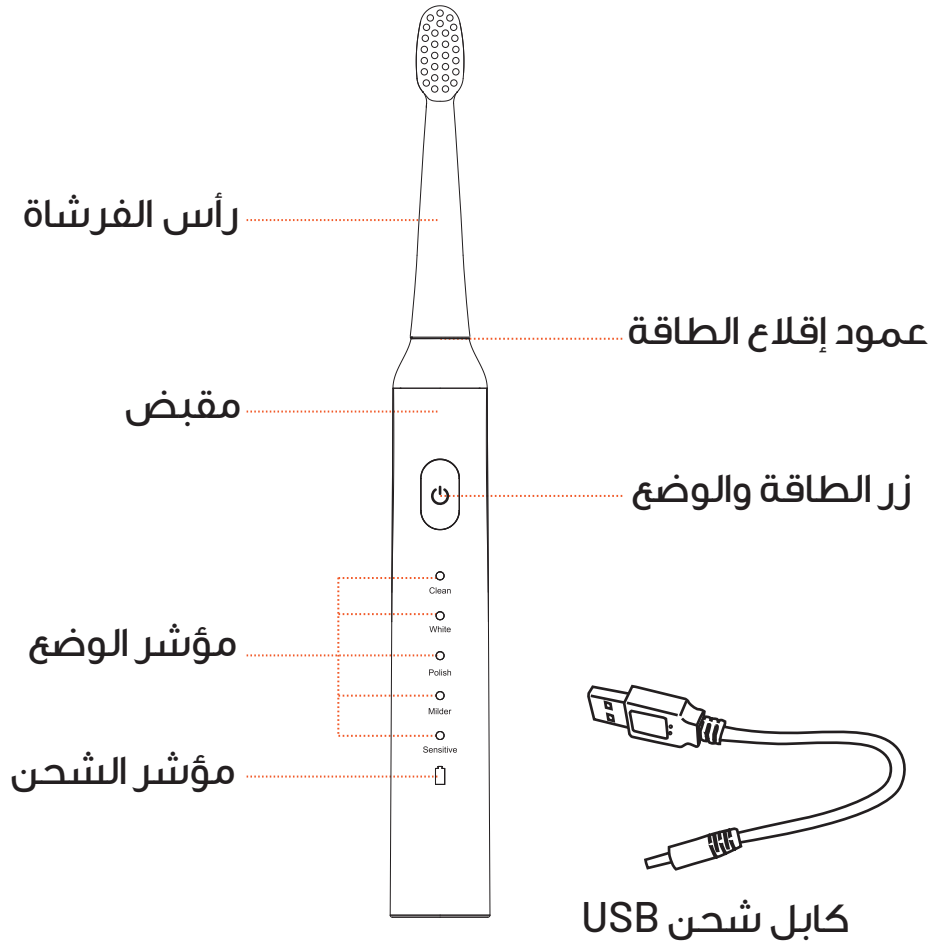


المواصفات

الإدخال	ه فولت / أ أمبير
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير / ساعة
عمر البطارية	حتى ٥٠ يومًا
مدة الشحن	٣ ساعات
مستوى الضوضاء	> ٥٥ ديسيبل
مستوى مقاومة الماء	IPX7
نوع الشحن	منفذ تيار مستمر
تردد الاهتزاز	١٨٠٠٠ - ٢٠٠٠٠ ضربة / دقيقة
حجم المنتج	٢٣٥ × ٢٥ × ٢٤ مم
الفئة العمرية	للبالغين
رقم الموديل	LFS2٠٠


تعليمات الاستخدام

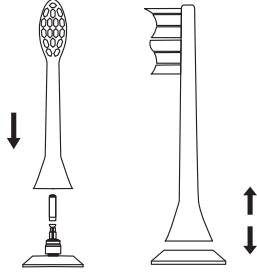


١. أدخل رأس الفرشاة عمودياً في الفراغ الموجود بينه وبين المقبض.
ملاحظة: ستبقى فجوة صغيرة بينه وبين المقبض.

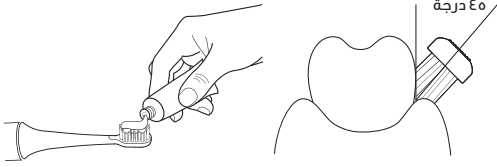

٢. بلل رأس الفرشاة وضع كمية مناسبة من معجون الأسنان.

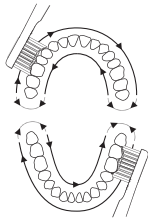


٣. اضغط رأس الفرشاة برفق على ملتقى أسنانك ولثتك بزاوية ٤٥ درجة.

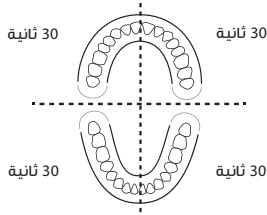

٤. اضغط على زر الوضع لاختيار وضع التنظيف المطلوب. حرك رأس الفرشاة برفق ذهاباً وإياباً بين أسنانك.

٥. تعمل فرشاة الأسنان بذكاء لمدة دقيقتين، وتتوقف كل ٣٠ ثانية لتذكيرك بالانتقال إلى المنطقة التالية.

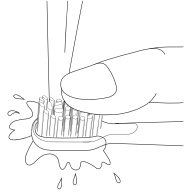

٦. بعد التنظيف، اشطف رأس الفرشاة بالماء الجاري النظيف ورجّه للتخلص من أي ماء زائد.

الوظيفة والوضع

اضغط زر التشغيل لفترة وجيزة لتشغيل الجهاز، واضغط عليه مطولاً لإيقاف تشغيله. بعد التشغيل، اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع التنظيف. عند الوصول إلى آخر وضع، اضغط لفترة وجيزة لإيقاف التشغيل.

وضع التنظيف

يزيل البلاك بفعالية (الوضع الافتراضي). يستمر وضع التنظيف لمدة دقيقتين ويتضمن أربع فترات زمنية مدتها ٣٠ ثانية.

الوضع الأبيض

يُبيّض الأسنان في دقيقتين، ويُحسّن لون سطحها بفعالية.

وضع التلميع


يُبيّض ويُلمّع الأسنان الأمامية. يُمكن للمستخدمين الضغط مُطوّلاً على زر التشغيل لإيقاف التلميع مُبكراً حسب الحاجة.

الوضع الأخف

موصى به للمبتدئين. ينظف هذا الوضع الأسنان بفعالية ويدلك اللثة بلطف لتحسين صحتها.

شحن المنتج

1. الشحن المباشر: أدخل موصل التيار المستمر لكابل الشحن في منفذ شحن الجهاز، ثم وصل الطرف الآخر بمحول قياسي ه فولت (انظر الشكل ١)
2. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، يومض مؤشر الشحن، مشيراً إلى أن الجهاز بحاجة إلى الشحن.
3. أثناء الشحن، يومض مؤشر الشحن ببطء وبشكل مستمر.
4. بعد اكتمال الشحن، سيبقى مؤشر الشحن مضاءً باستمرار ويتوقف عن الوميض.

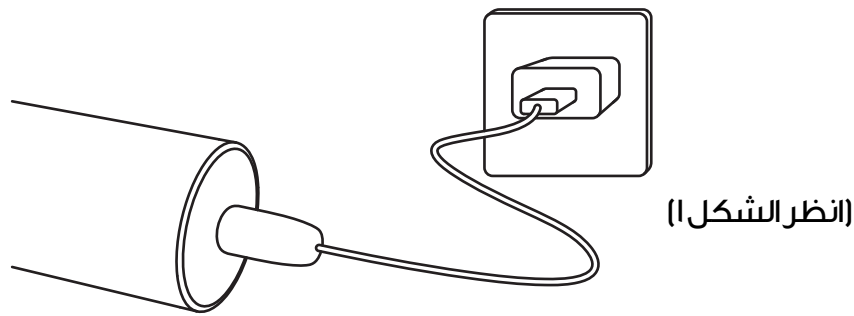

أثناء الشحن، من الطبيعي أن يكون المقبض والقاعدة دافئين قليلاً. لضمان السلامة، استخدم دائماً الشاحن القياسي الأصلي.

بعد الشحن، يُرجى فصل الشاحن عن الكهرباء لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى تلف المكونات أو تلف الشاحن أو التعرض لصدمة كهربائية.

قبل توصيل الشاحن بمصدر طاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي على المنتج يتطابق مع جهد مصدر الطاقة المحلي لديك.

خطر

احفظ الشاحن بعيدًا عن أي مصادر للمياه. لا تضعه أو تخزنه بالقرب من حاويات تحتوي على الماء، مثل أحواض الاستحمام، والمغاسل، والمساح، وما إلى ذلك. لا تغمر الشاحن أبدًا في الماء أو أي سوائل أخرى. بعد التنظيف، تأكد من جفاف الشاحن تمامًا قبل توصيله بمصدر الطاقة.


تحذير من الخطر

١. لا تستبدل سلك الطاقة. في حال تلف سلك الطاقة، تخلص من الشاحن فورًا. استخدم دائمًا طراز الشاحن الأصلي لتجنب مخاطر السلامة. في حال تلف أي جزء من المنتج (رأس الفرشاة، مقبض فرشاة الأسنان، أو الشاحن)، توقف عن استخدامه فورًا.


٢. استخدم محولًا بجهد خرج ه فولت و أمبير لشحن المنتج. قد يؤدي الشحن باستخدام محول ذي جهد خرج مرتفع إلى تلف المنتج أو مخاطر على السلامة.

الصيانة

١. عند تنظيف رأس الفرشاة، يُرجى إدارته للأسفل.
٢. بعد كل استخدام، نظّف شعيرات الفرشاة ورؤوسها وجففها بالهواء بشكل طبيعي.
٣. تجنب سحب الشعيرات لمنع تشوهها.
٤. عند تنظيف جسم فرشاة الأسنان، امسحها بقطعة قماش جافة.
٥. لا تنقع فرشاة الأسنان في الماء لفترات طويلة.
٦. تجنب استخدام الماء أو محاليل التنظيف الحمضية التي تزيد درجة حرارتها عن ٤٠ درجة مئوية للتنظيف.

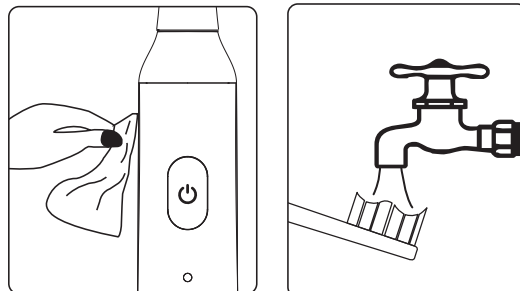

تحتوي فرشاة الأسنان الكهربائية الصوتية هذه على بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. عند التخلص من هذا المنتج، يُرجى عدم إلقائه مع النفايات المنزلية العادية. انزع البطارية وانقلها إلى مركز إعادة تدوير بطاريات معتمد من الحكومة للمساعدة في حماية البيئة.

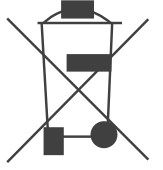

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me