

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مجموعة العناية المثالية بالفم
فرشاة أسنان كهربائية وخيط تنظيف مائي

SKU: PDLSTC2254

٢	المقدمة
٢	تحذير
٣	مكونات جهاز تنظيف الأسنان بالماء
٤	مواصفات جهاز تنظيف الأسنان بالماء
٤	تعليمات استخدام جهاز تنظيف الأسنان بالماء
٦	دليل شحن المنتج
٨	العناية والصيانة
٩	مكونات فرشاة الأسنان
٩	أوضاع فرشاة الأسنان
١٠	تعليمات استخدام فرشاة الأسنان
١١	مؤشر شحن فرشاة الأسنان
١٢	مواصفات فرشاة الأسنان
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا


نشكركم لاختياركم فرشاة الأسنان الكهربائية وخط تنظيف الأسنان المائي "The Ultimate Oral Care" للحصول على ابتسامة مثالية. نثق بأن هذه المجموعة ستلبي جميع احتياجاتكم الصحية وتحقق النتائج المرجوة. يُرجى مراجعة دليل الاستخدام قبل استخدام المنتج لضمان السلامة والأداء الأمثل.

تحذير

1. لا تُفكّك المنتج أو تُغيّر أيًا من مكوناته دون تصريح مناسب، فقد يُسبّب ذلك تلفًا أو صدمة كهربائية، مما يُبطل الضمان.
2. تجنّب تنظيف المنتج بماء تزيد درجة حرارته عن ٤٠ درجة مئوية. في حال غمر المنتج أثناء الشحن، افصل مُحوّل الطاقة وأخرج المنتج فورًا لتجنب الصدمة الكهربائية.
3. لا تُعرّض المنتج للنار أو الحرارة الزائدة. تجنّب شحن المنتج في بيئات حارة أو رطبة، وتأكد من عدم وضعه تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
4. لا تفصل قابس الطاقة أو كابل الشحن بأيدي مبللة أثناء الشحن.
5. المنتج لا يحتوي على مُحوّل. في حال استخدام مُحوّل من جهة خارجية، تأكد من أنه يُخرج تيارًا مستمرًا ه فولت، كما هو الحال في شاحن الهاتف المحمول، وتأكد من أنه يُطابق مواصفات الجهد المطلوبة.
6. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل كلاً من قابس الطاقة وكابل الشحن لتجنب المخاطر المُحتملة.
7. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال أو ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، إلا تحت إشراف شخص لديه المعرفة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن.
8. تجنب استخدام المنتج إذا كنت تعاني من قرح الفم، أو أجريت جراحة فموية حديثة، أو حساسية في اللثة أو الأسنان، إلا بموافقة طبيب أسنان. قد يسبب الاستخدام نزيّفًا أو ضررًا إضافيًا.
9. في حال حدوث أي نزيّف أثناء استخدام المنتج، استشر طبيب أسنانك.
10. تأكد دائمًا من إدخال الفوهة بشكل صحيح قبل تشغيل جهاز تنظيف الأسنان بالماء لمنع تناثر الماء غير الضروري.

١١. تخلص من بطاريات الليثيوم أيون بطريقة مسؤولة ووفقاً للوائح المحلية للتخلص من النفايات الإلكترونية.
١٢. لا تشحن المنتج مباشرةً أو باستخدام قاعدة الشحن عندما يكون مبللاً أو أثناء الاستحمام.
١٣. تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.
١٤. المنتج مقاوم للماء ويمكن استخدامه أثناء الاستحمام.
١٥. إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب، استشر طبيبك قبل الاستخدام لتجنب أي تداخل.
١٦. تأكد من جفاف منفذ الشحن وخلوه من أي ماء قبل شحن المنتج.

مكونات جهاز تنظيف الأسنان بالماء

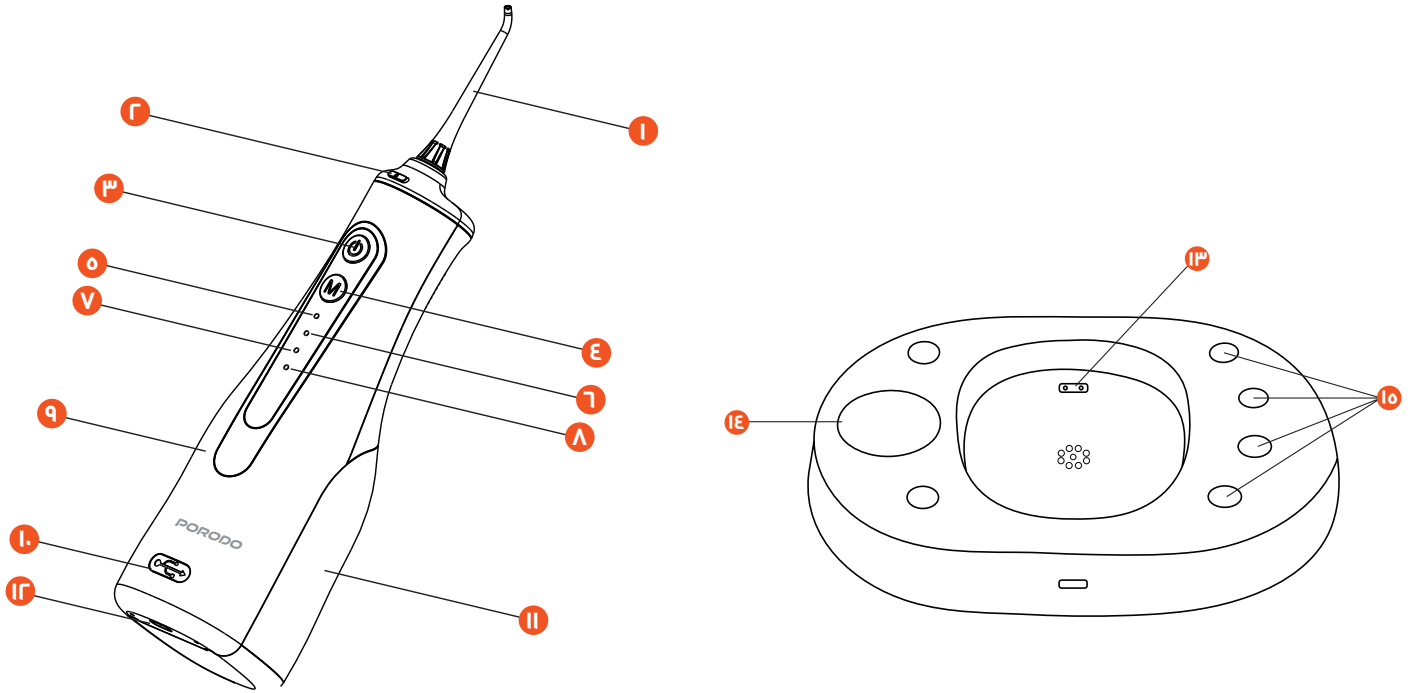

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ٩. الهيكل الرئيسي | ١. الفوهة |
| ١٠. منفذ شحن من النوع C | ٢. مفتاح تحرير الفوهة |
| ١١. خزان مياه | ٣. زر التشغيل |
| ١٢. منفذ شحن | ٤. زر الوضع |
| ١٣. قاعدة شحن وحامل على شكل زهرة ماء | ٥. مؤشر وضع النبض |
| ١٤. حامل فرشاة أسنان كهربائية سونيك | ٦. مؤشر الوضع الناعم |
| ١٥. حامل فوهات خيط تنظيف الأسنان | ٧. مؤشر الوضع العادي |
| | ٨. مؤشر وضع الطاقة |


مواصفات جهاز تنظيف الأسنان بالماء

الطاقة المُصنَّفة	٦ واط
سعة البطارية	١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٤ ساعات
مدة التشغيل	أسبوعان (مرتان يوميًا)
واجهة الشحن	منفذ النوع C وقاعدة شحن
سعة خزان المياه	٣٠٠ مل
حجم المنتج	٢٢٤ × ٨٥ × ٦٩ مم
أوضاع استخدام جهاز تنظيف الأسنان بالخيط	٤ أوضاع (نبضي/ناعم/عادي/طاقة)

تعليمات استخدام جهاز تنظيف الأسنان بالماء

١. تركيب الفوهة


أدخل الفوهة في حامل الفوهة الموجود أعلى الوحدة الرئيسية حتى تُصدر صوت طقطقة.

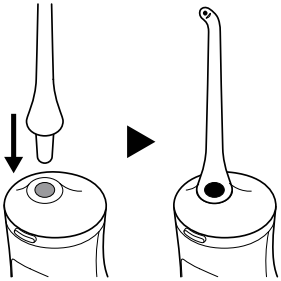

٢. حقن محلول التنظيف

٢.١ افتح غطاء فتحة تعبئة خزان المياه، واسكب الماء النظيف فيه، ثم أغلق غطاء خزان المياه.

٢.٢ في حال استخدام غسول فم مُركّز، خفّفه بالماء قبل تعبئة الخزان.

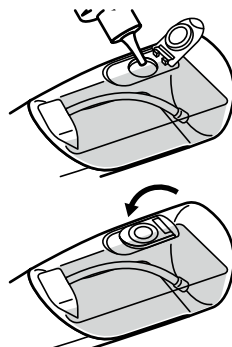

محاليل التنظيف المناسبة

يُنصح باستخدام السوائل التالية في خزان المياه.

مهم: لا تستخدم أي سوائل أخرى، فقد تُسبب عطلاً.


١. ماء الصنبور

٢. ماء دافئ (٤٠ درجة مئوية أو أقل)

٣. غسول للفم


٣. إعدادات الوضع

اضغط على زر تبديل الوضع في مقدمة الوحدة الرئيسية لاختيار ضغط الماء المطلوب. كل ضغطة تُغيّر الوضع بالترتيب التالي: نبضي، ناعم، عادي، وطاقة. تأكد من إضاءة مؤشر الوضع المُطابق للوضع المُختار.

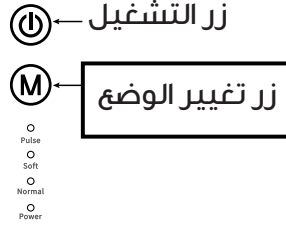

٤. التشغيل

أدخل طرف الفوهة في فمك واضغط على زر التشغيل. سيضيئ مؤشر الضوء للإشارة إلى بدء التنظيف.

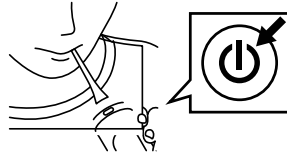


٥. التنظيف

٥.١ أثناء التنظيف، انحنِ للأمام وافتح فمك قليلاً لإخراج ماء التنظيف.

٥.٢ يُرجى ملاحظة أنه في حال فتح فمك على اتساعه، فقد يتناثر ماء التنظيف.


٥.٣ الوحدة الرئيسية مزودة بآلية مقاومة للماء، مما يضمن استخداماً آمناً حتى في حال تعرضها للبلل أثناء التنظيف.

٥.٤ يمكن تدوير الفوهة ٣٦٠ درجة، مما يسمح لك بضبطها على زاوية مريحة للاستخدام.

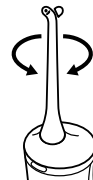


ملاحظة: إذا ارتفع خرطوم إمداد الماء داخل الخزان عن سطح الماء، فلن يتدفق ماء التنظيف. اضبط الهيكل الرئيسي وتأكد من غمر الخرطوم بالماء لضمان تدفق الماء بشكل صحيح.

تحذير: وجه تيار الماء بين الأسنان واللثة، ثم حركه ببطء على طول اللثة من الأضراس (الأسنان الخلفية) إلى الأسنان الأمامية. نظف أسطح الأسنان والجزء الخلفي منها.

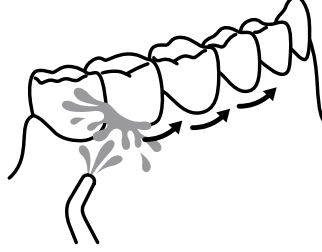


٦. إيقاف

لإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية، كما هو الحال عند نفاد مياه التنظيف، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.

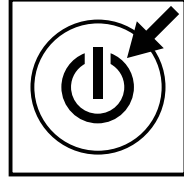

٧. أزل الفوهة

اضغط على زر تحرير الفوهة واسحبها لأعلى لإزالتها.

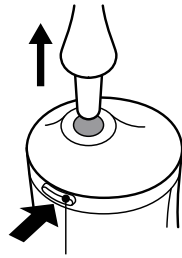

دليل شحن المنتج

إذا أوقفت الجهاز أو ضغطت على زر التشغيل أثناء التشغيل، وومضت مؤشرات الوضع الأربعة في وقت واحد، فهذا يعني أن طاقة البطارية منخفضة وتحتاج إلى شحن.


١. انزع الغطاء من منفذ شحن الجهاز الرئيسي، ثم وصل كابل USB-C المرفق به. ثم وصل الطرف الآخر (USB-A) من كابل الشحن بمحول شحن USB.

١.١ يمكن أيضًا شحن جهاز تنظيف الأسنان بالماء عند وضعه على قاعدة الشحن.

١.٢ إذا كان منفذ شحن الوحدة الرئيسية مبللاً بالماء، فامسحه بقطعة قماش جافة قبل توصيل كابل الشحن. ابدأ الشحن فقط بعد جفاف المنفذ تمامًا.

٢. الشحن

عند بدء الشحن، تضيء مؤشرات الوضع الأربعة بالتتابع للإشارة إلى أن الشحن جارٍ.

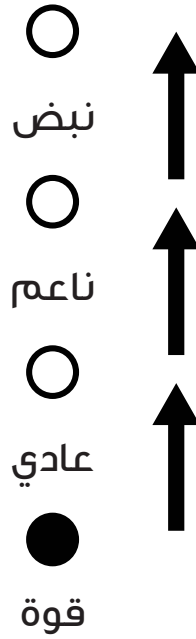

٣. مشحون بالكامل


بمجرد اكتمال الشحن، ستضيئ مؤشرات الوضع الأربعة في وقت واحد، للإشارة إلى اكتمال شحن الجهاز.




١. بعد كل استخدام، افتح الخزان وتخلص من أي ماء متبقٍ. ثم اضغط على زر التشغيل لتفعيل الجهاز وتصريف أي ماء متبقٍ في الفوهة. عندما يتوقف تدفق الماء، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

٢. في حال تراكم الأوساخ داخل الخزان، أضف كمية قليلة من الماء الفاتر (٤٠ درجة مئوية أو أقل)، وحركه جيدًا، ثم نفذ الخطوات المذكورة أعلاه.

٣. للحفاظ على نظافته، اشطف الفوهة بالماء بعد كل استخدام واتركها تجف.

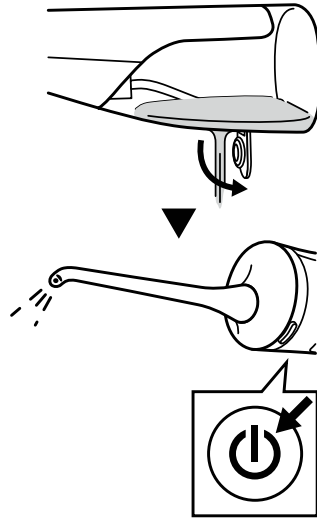


إذا لم يتم رش الماء لفترة طويلة، افصل الفوهة واضغط على صمام الماء في مخرج الماء بشكل متقطع باستخدام أداة يبلغ قطرها أقل من ٦ مم حتى يبدأ الماء في الرش.

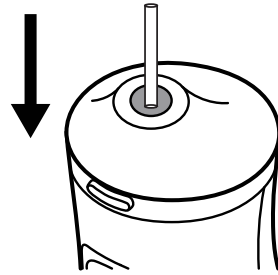


حرك خزان الماء لفصله عن القاعدة.

يوجد مدخل هواء في هذا الجزء من خزان الماء. عند ملء الخزان بالماء وقلبه، قد تتسرب كمية قليلة من الماء، وهو أمر طبيعي. أثناء التشغيل، في حال دخول هواء إلى الخزان، تأكد من توازن ضغط الهواء داخله.

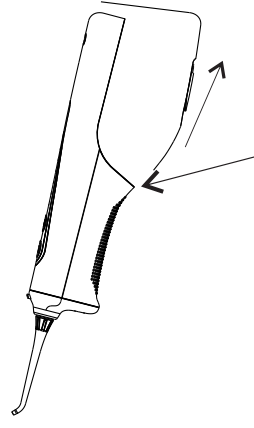

مكونات فرشاة الأسنان

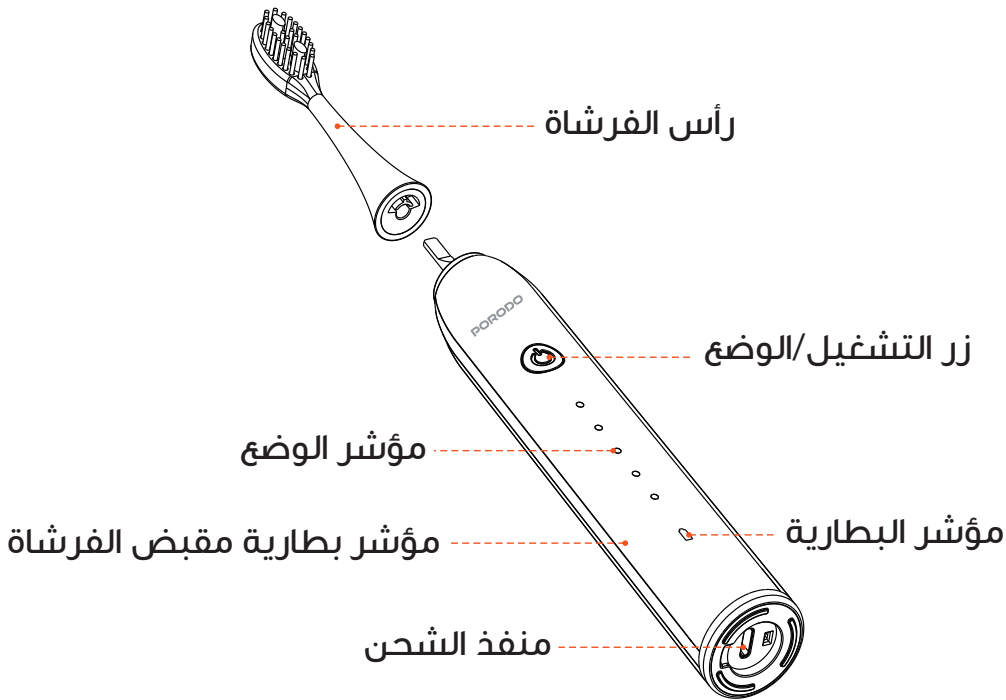

أوضاع فرشاة الأسنان

تنظيف: يزيل بقايا الطعام والبلاك.

إنعاش: يشطف الفم وينعش الأسنان.


تبييض: يزيل البقع السطحية ويبييض الأسنان.

تلميع: يزيل الجير والجير من الأسنان.


حساس: يدلك اللثة الحساسة ويقلل الاهتزازات لتجربة أكثر لطفاً.




١. ثبّت رأس الفرشاة بإحكام على عمود المقبض، مع ترك مسافة امم تقريبًا بين رأس الفرشاة والمقبض. تتيح هذه المسافة اهتزازات فعّالة لضمان أداء مثالي لفرشاة الأسنان.

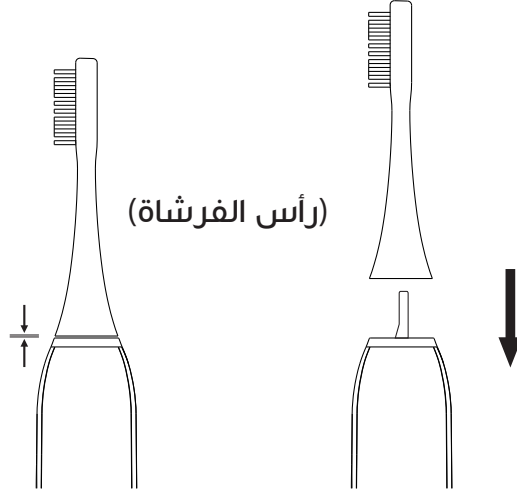


٢. ضع رأس الفرشاة على حافة أسنانك ولثتك.

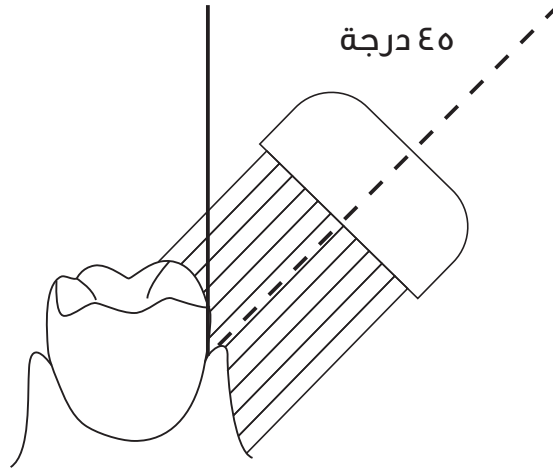


٣. ضع رأس الفرشاة برفق عند ملتقى الأسنان واللثة. اضغط على زر الوضع عدة مرات خلال ثلاث ثوانٍ لاختيار وضع التشغيل المطلوب. حرّك رأس الفرشاة برفق ذهابًا وإيابًا لتنظيف جميع أسنانك.

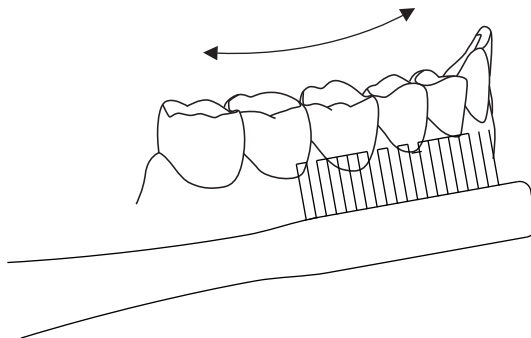

٤. اضغط على زر التشغيل/الوضع لاختيار الوضع المطلوب. حرّك رأس الفرشاة برفق ذهابًا وإيابًا لتنظيف جميع أسنانك. تتميز فرشاة الأسنان بفاصل زمني لمدة ٣٠ ثانية لإعلامك بالانتقال إلى القسم التالي من فمك. كما تتميز بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي لمدة دقيقتين، وهي ميزة يوصي بها أطباء الأسنان.

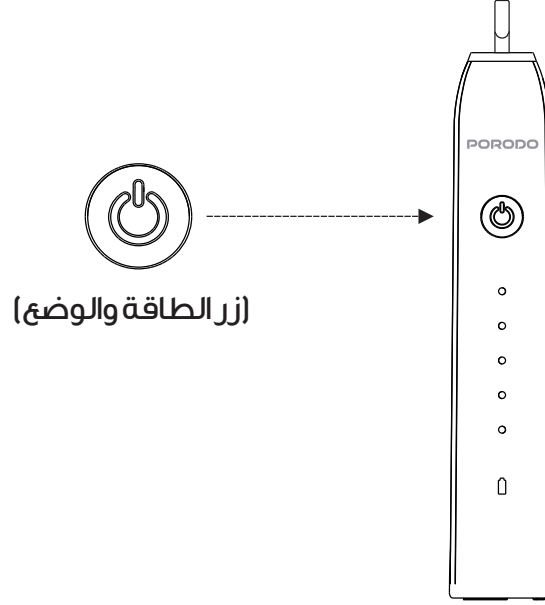


٥. اشطف فمك ورأس الفرشاة بالماء. حافظ على رأس الفرشاة جافًا، ونظف المقبض بقطعة قماش ناعمة.

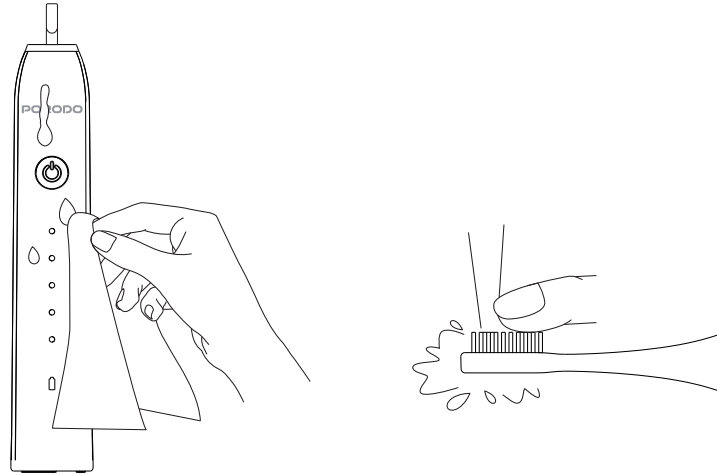

مؤشر شحن فرشاة الأسنان

صل كابل شحن USB بشاحن USB أو منفذ USB بالحاسوب. سيتغير لون مؤشر فرشاة الأسنان من الأحمر إلى الأخضر بعد ٦ ساعات، مُشيرًا إلى اكتمال الشحن.

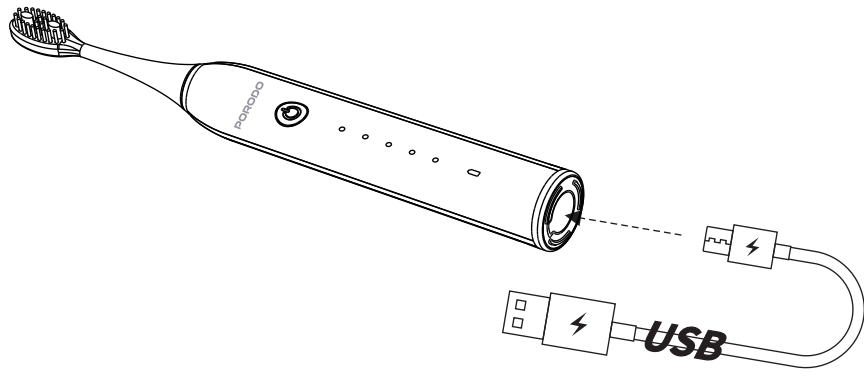

مواصفات فرشاة الأسنان

الإدخال	ه فولت/ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	١.٥ واط
سعة البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ ساعة
مدة الشحن	ساعتان
مدة التشغيل	شهران
واجهة الشحن	نوع C
مستوى الضوضاء	٦٠ > ديسيبل
مستوى مقاومة الماء	IPX7
حجم المنتج	٢٣٥ × ٣٢ × ٣٢ مم
أوضاع فرشاة الأسنان	ه أوضاع (تنظيف/ تحديث/ تبييض/ تلميع/ حساس)

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**