

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

**ميزان أطفال رقمي كهربائي من
MINIMEASURE**

SKU: PDLFSTD5C5HWH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	الأزرار والوظائف
٥	تركيب البطاريات
٥	تعليمات الاستخدام
٦	احتياطات السلامة
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

ميزان Porodo Lifestyle Minimeasure الكهربائي الرقمي للأطفال هو ميزان دقيق وموثوق مصمم خصيصًا للرضع. يتميز بمستشعر عالي الدقة يضمن قياسات دقيقة تصل إلى ٤٠ كجم، مما يجعله مناسبًا للأطفال الرضع والصغار. يتضمن الميزان شريط قياس بطول ١٥٠ سم لسهولة قياس الطول، ويوفر إمكانية تحويل الوحدات لمزيد من الراحة. تتيح وظيفة الوزن الصافي ضبط وزن البطانيات أو المواد الأخرى على الصفر، بينما تضمن وظيفة التثبيت بقاء القياس معروضًا لسهولة القراءة. يُعد هذا الميزان سهل الاستخدام مثاليًا للآباء الذين يبحثون عن طريقة موثوقة لمراقبة نمو أطفالهم.

المواصفات

المواد	ABS
الوحدات	جم، كجم، أونصة، رطل
مصدر الطاقة	٣ بطاريات AAA
نطاق الوزن	٣٠ جم - ٤٠ كجم
القسم	٥ جم
قياس الطول	٠ سم - ١٥٠ سم
وزن المنتج	١,٠٥ كجم



حجم المنتج	٥٥٠ × ٣٢٠ × ٤٧ مم
رقم الموديل	PDLFSTDCH

محتويات العبوة

ميزان واحد

٣ بطاريات AAA

الأزرار والوظائف

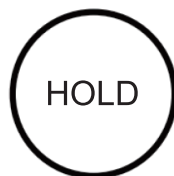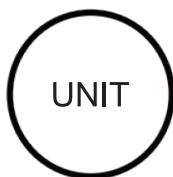

١. زر التشغيل/الإيقاف:

اضغط على هذا الزر لتشغيل الميزان، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقافه.

٢. زر "TARE":



أ. اضغط على زر "TARE" لمسح وزن الميزان قبل الوزن.

ب. اضغط على زر "TARE" قبل وضع الملابس والبطانيات على الدرج لإزالة وزن الملابس.

ج. بمجرد أن تظهر الشاشة "0" (كما هو موضح أدناه)، ضع الطفل على الميزان لضمان دقة القياس.

٣. زر "Hold": تثبيت الوزن

أ. بمجرد ثبات قيمة الوزن، اضغط على زر "Hold" لالتقاط الوزن على الشاشة.



ب. لإلغاء البيانات الملتقطة، اضغط على الزر مرة أخرى.

ج. سيتم تثبيت الوزن تلقائيًا. بمجرد تثبيته، يومض الوزن مرتين ثم يُثبت.

د. لتثبيت الوزن لفترة طويلة، اضغط على زر "Hold" مرة أخرى.


٤. زر "UNIT": تحديد الوحدة

استخدم زر "UNIT" لتحديد وحدة الوزن المعروضة على الشاشة. يمكنك القياس بوحدات مختلفة مثل الكيلوجرام (كجم) أو الأونصة (أونصة).

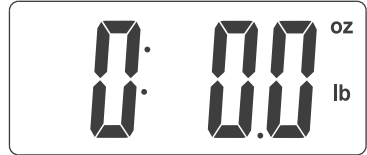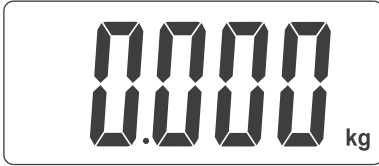

٥. وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي (وضع توفير الطاقة):

يتوقف الميزان تلقائيًا بعد دقيقتين تقريبًا من عدم الاستخدام لتوفير طاقة البطارية.

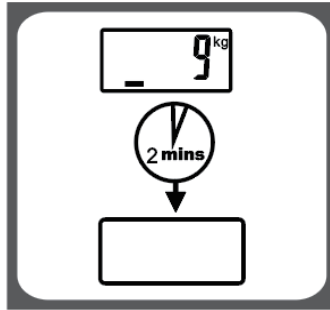

٦. استهلاك البطارية:

هذا المنتج موفر للطاقة وصديق للبيئة. يعمل بثلاث بطاريات AAA.

تأكد من إزالة طبقة العزل عن البطاريات قبل الاستخدام، وركبها في الاتجاهين الصحيحين

."+" و "-" و "."

تركيب البطاريات

١. افتح غطاء البطارية الموجود أسفل الميزان.

٢. عند تركيب البطاريات، ضع طرف البطاريات "-" في حجرة البطارية أولاً، ثم اضغط على طرف البطاريات "+" لإتمام التركيب.

ملاحظة: تأكد من وضع طرفي البطاريات "+" و "-" بشكل صحيح قبل التركيب.



3*AAA


تعليمات الاستخدام

١. ضع الميزان على طاولة أو مكتب أو أي سطح مستوٍ آخر. يُمنع وضعه على سجادة.



٢. اضغط على زر "ON / OFF" لتشغيل الميزان، ثم اضغط على زر "TARE" للتأكد من أن الشاشة تعرض "٠".

٣. بمجرد أن تعرض الشاشة "٠"، يمكنك البدء في استخدام الميزان.

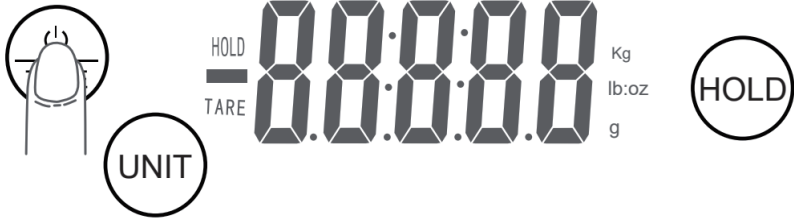

٤. بعد أن تظهر الشاشة "0"، (كما هو موضح في الصورة)، ضع الطفل على الميزان. اضغط على زر "UNIT" لاختيار الوحدة المفضلة (جم، كجم، أونصة، رطل: أونصة).
٥. ضع الطفل على لوحة الوزن بوزنه الكامل. ستعرض الشاشة الرقمية الوزن بالوحدة التي اخترتها.
٦. اضغط على زر "HOLD" لتجميد عرض الوزن. اضغط على الزر مرة أخرى لحذف البيانات المحفوظة.
- ملاحظة:** إذا كنت تستخدم الميزان بدون لوحة الوزن، أبقِ الطفل في وضع مستقيم على الميزان وتأكد من توزيع قدميه بالتساوي لتوزيع الوزن بشكل صحيح.

احتياطات السلامة

١. ضع الميزان على سطح مستوي قبل الاستخدام.
٢. لا تضع المنتج أو تستخدمه في بيئة رطبة أو شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.
٣. احمِ المنتج من التلف الناتج عن السقوط أو الصدمات القوية، فهو منتج إلكتروني عالي الدقة.
٤. استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف فقط؛ لا تستخدم محاليل كيميائية أو ماء أو أي سوائل أخرى لتنظيف المنتج.
٥. هذا المنتج مخصص لقياس بيانات الأسرة، ولا يُستخدم للقياسات الاحترافية.
٦. انزع البطاريات إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة.
٧. استبدل البطاريات عندما يظهر على شاشة "LED" "L".
٨. إذا أظهرت شاشة "LED" "ERR" (يشير إلى وجود حمل زائد، مع حد أقصى للوزن ٤٠ كجم)، يُرجى إزالة أي أجسام لتجنب التلف.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)